

# Digitálna osobná váha

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SBS 2004SL

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného balacieho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabáľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

**OBSAH**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	9
POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY .....	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	11
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ .....	11
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	12
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	12

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo men-tálou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahrňajúce použitie tohto výrobku osobou zod-povednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebez-pečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré nohy. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- 6) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 7) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 8) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- 9) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 10) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 11) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výro-bok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 12) Na váhu nikdy neskáčte.
- 13) Váha je určená iba a výhradne na váženie osôb.
- 14) Vo výrobku nepoužívajte dobíjacie batérie.
- 15) Pokiaľ nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vyučteniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 16) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín atď.).


## UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY

### Pred prvým použitím

- 1) Aby bolo zaručené presné váženie, umiestnite váhu na rovný a tvrdý povrch (parkety, dlaždice, linoleum atď.). Váženie neodporúčame vykonávať na kobieri.
- 2) Pred vážením si vždy vyzujte topánky.
- 3) Odporúčame, aby ste svoju hmotnosť kontrolovali vždy v rovnaký čas, a to najlepšie ráno po prebudeň, kedy sa neprejavujú hmotnostné odchýlky spôsobené stravovaním, trávením alebo telesnými aktivitami počas dňa.
- 4) Výsledok merania môže byť po intenzívnom cvičení, diétnom režime alebo pri extrémnej dehydratácii zavádzajúci.
- 5) Počas merania stojte pokojne.
- 6) V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy.
- 7) Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- 8) Síle magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

### Batérie

Snímte kryt priestoru na uloženie batérie umiestnený na spodnej strane váhy (pozri obr.) a odstráňte izolačnú pásku, ktorá zabráňuje vybitiu batérie pri preprave.

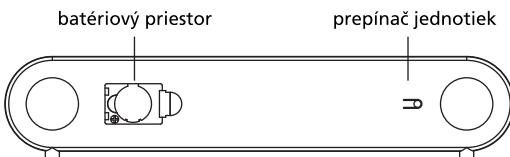

## POUŽITIE

Táto váha je vybavená patentovanou funkciou „Auto-on“. Pred vážením nie je potrebné na váhu poklepať ani nijako inak aktivovať prevádzkový režim. Pokiaľ si prajete zistíť svoju hmotnosť, jednoducho stúpnite na váhu, ktorá vám okamžite ukáže vašu aktuálnu hmotnosť bez nutnosti čakania.

### Ochrana proti preťaženiu

Táto váha je vybavená senzorom na preťaženie - pokiaľ dôjde k preťaženiu váhy, displej zobrazí varovnú hodnotu „- - -“.

### Funkcia automatického vypnutia

Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti – k jej automatickému vypnutiu dôjde po 10 sekundách, kedy s ňou nebudete manipulovať.

### Prepnutie jednotiek hmotnosti

Táto váha je vybavená prepínacom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepínať medzi metrickými (kilogramy) a britskými (libry alebo stones) jednotkami, urobte tak pomocou prepínača na zadnej strane váhy (kg --> lb --> st). Zmena jednotiek sa prejaví zobrazením na displeji váhy.

Pozn.:

1 lb (libra) = 0,45 kg

1 st (stone) = 6,35 kg

# Digitálna osobná váha

SBS 2004SL

SK

## Výmena batérie

Pokial' sa na displeji zobrazí hodnota „Lo“, je potrebné vymeniť batériu.

Otvorte batériový priestor umiestnený na spodnej strane váhy a batériu vymeňte za novú. Dbajte pri-tom na správne dodržanie polarity (kladný pól batérie musí byt vždy smerom nahor).

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batériu, potom ju vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použité batérie nepatria do domového odpadu.

Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie .....	3V lítiová batéria (CR2032)
Merací rozsah .....	2,5 – 150 kg
Presnosť váženia .....	100g
Prepínanie hmotnostných jednotiek .....	kg --> lb --> st
Viditeľná veľkosť displeja .....	71 x 34 mm
Rozmery (š x d x v) .....	310 x 310 x 19 mm
Hmotnosť .....	1,7 kg

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách Európskej únie a iných európskych krajinach existujú samostatné zberné systémy na zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Na získanie podrobnejších informácií na recykláciu tohto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

**POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.