

SENCOR®

SOC 4210BL / SOC 4211GD






**ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ**
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR[®]

SOC 4210BL / SOC 4211GD

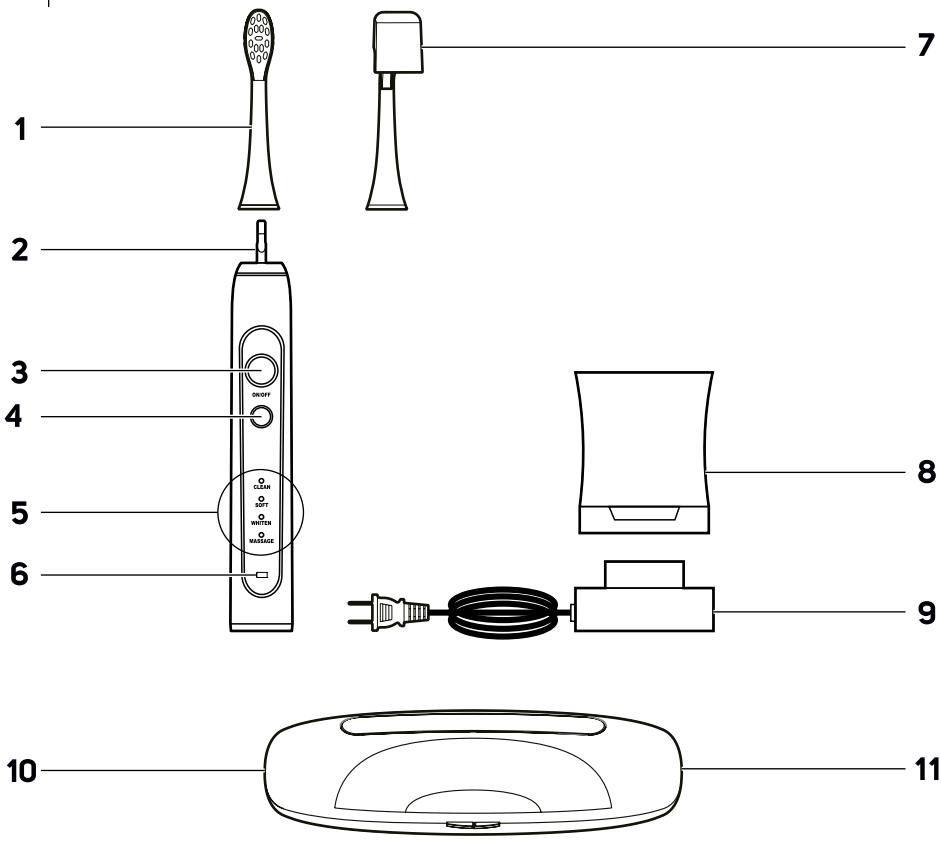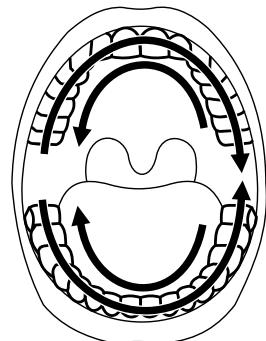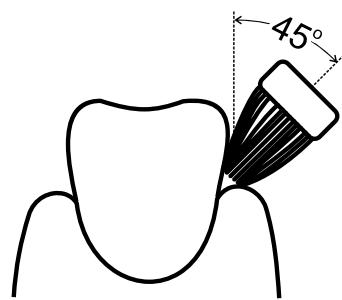

A**B**

GR Οδοντόβουρτσα με επαγωγική φόρτιση

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Τα μέρη της συσκευής που πρέπει να είναι συναρμολογημένα ή τοποθετημένα σε όρθια θέση, πρέπει να συναρμολογηθούν ή να τοποθετηθούν όρθια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.
- Χρησιμοποιείτε τη γνήσια βάση φόρτισης που παρέχεται για τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας. Προτού συνδέσετε

τη βάση φόρτισης σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της τιμών της συμφωνεί με την τάση της πρίζας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πρώτον συνδέστε τη βάση φόρτισης σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέτετε και αποσυνδέτε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος της βάσης φόρτισης στην/από την πρίζα ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέτετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος. Αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο ρεύματος USB ή η προσαρμογέας ρεύματος USB έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό αέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμια εξειδίκευση για να απορευθούν επικινδυνές καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου ρεύματος, καλωδίου ρεύματος USB ή προσαρμογέα USB που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη βάση φόρτισης.
- Η συσκευή διαθέτει εναστατωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνο/-n σας.



Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχικυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής γρέπειν θα εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας /n ίδιας/a στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από πλεκτροπλήξια μην βυθίζετε τη βάση φόρτισης και το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο φόρτισης USB και τον προσαρμογέα USB σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Εάν η βάση φόρτισης πέσει σε νερό, σε καμία περίπτωση μην την χρησιμοποιήσετε. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η οδοντόβουρτσα καθαρίζει τα δόντια και τα ούλα και προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς ή για οικονούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην εκθέτετε την οδοντόβουρτσα στα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο πλιού φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φλόγα, θερμαντικά στοιχεία και άλλα εξοπλισμό ή συσκευές που θα μπορούσαν να είναι πιθανές πηγές θερμότητας.
- Τοποθετείτε πάντα το ποτηράκι μαζί με τη βάση φόρτισης επάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Προστατεύστε τη θήκη ταξιδιού από το νερό. Μην την τοποθετείτε κοντά σε δοχεία με νερό, p.χ. νιπτήρες, μπανιέρες κ.λπ., μην την ψεκάζετε με νερό, μην την βυθίζετε σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Να κρατάτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος της βάσης φόρτισης.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για λόγους υγείας, η κάθε κεφαλή της οδοντόβουρτσας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν χρήστη. Αντικαθιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρει σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας.
- Όταν την οδοντόβουρτσα χρησιμοποιείται από παιδιά, επιβλέπετε τη για όσα χρονικό διάστημα βυρτούταιζουν τα δόντια τους μέχρι να κατακτήσουν την ωστική τεχνική.
- Σε περίπτωση που έχετε υποβληθεί σε οδοντιατρικές εργασίες ή σε κειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα κατά τους τελευταίους δύο μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο σας σχετικά με τη χρήση οδοντόβουρτσας με τεχνολογία υπερήχων.
- Σε περίπτωση που παρουσιάστε αιμορραγία στα ούλα κατά τη χρήση της οδοντόβουρτσας και οι αιμορραγία παραμένει ακόμα και μετά από μία εβδομάδα χρήσης, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
- Εάν η οδοντόβουρτσά σας περιέχει υπεροξείδιο (peroxīde), διπτανθρακική σόδα (sodium bicarbonate) ή άλλο διπτανθρακικό (χρησιμοποιείται συχνά σε οδοντόκρεμες), ζεπλένετε σχολαστικά τη βύρτσα και τη λαβή μετά από κάθε χρήση.
- Σε περίπτωση που φέρετε βηματοδότη ή άλλο εμφυτευμένη συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος σχετικά με τη χρήση της οδοντόβουρτσας.
- Πραγματοποιείτε την καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε την οδοντόβουρτσα ή τη αξεσουάρ της σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στην οδοντόβουρτσα ή στα αξεσουάρ της. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/n ίδια στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR

Οδοντόβουρτσα με επαγωγική φόρτιση

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξουσιοδοτημένοι – με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπους περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφοράστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξτε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της. Σύνιστούμες να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διλήσων ευθύνης του πολυτέλη, ή την κάρτα εγγύησης του λαχίστον για διόσ διάστημα δικαιούτε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Κεφαλή οδοντόβουρτσας με χρωματιστό δακτύλιο

A2 Άδονας σύνδεσης

A3 Κεντρικός διακόπτης

A4 Διακόπτης εναλλαγής λειτουργίας

A5 Ενδείξεις λειτουργίας LED:
CLEAN – τυπική λειτουργία
καθαρισμού
SOFT – απαλή λειτουργία
καθαρισμού για ευαίσθητα ούλα

WHITEN – λειτουργία λεύκανσης

MASSAGE – λειτουργία μασάζ ούλων

A6 Ένδειξη μπαταρίας

A7 Καπάκι κεφαλής

A8 Ποτήρια αποθήκευσης

Όταν τοποθετείται στη βάση φόρτισης, χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας

A9 Βάση φόρτισης

A10 Υποδοχή Micro-USB για καλώδιο φόρτισης USB

A11 Θήκη ταξιδίου με φίλτρο UV

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύντε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας και το ποτήρι με ζεστά, καθαρό νερό.
- Σκουπίστε το κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας με ένα στεγνό ή ελαφρώς ωντό πανί. Ποτέ μην βιβλίζετε τη βάση φόρτισης και το καλώδιο ρεύματος σε νερό, μην τα καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή τα πλένετε σε πλυντήριο πάτωντα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει σύστημα επαγωγικής φόρτισης, το οποίο λειτουργεί με την αρχή της μεταφοράς ενέργειας μέσω πλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετήσετε την οδοντόβουρτσα στο ποτήρι μαζί με τη βάση φόρτισης και να συνδέσετε τη βάση φόρτισης σε πηγή πλεκτρικού ρεύματος:
- Τοποθετήστε το ποτήρι μαζί με τη βάση σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
- Τοποθετήστε την απενεργοποιημένη οδοντόβουρτσα στο ποτήρι. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα και η ένδειξη μπαταρίας LED στο κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας θα ανάψει.
- Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, η ένδειξη LED θα ανάψει με μπλε χρώμα.



Προσοχή:

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο ποτήρι μαζί με την οδοντόβουρτσα. Ενδέκεται να επιφράσουν τη διαδικασία φόρτισης και να προκαλέσουν υπερθέρμανση της βάσης φόρτισης.



Σημείωση:

Κατά την πρώτη φόρτιση της οδοντόβουρτσας μετά την αγορά ή σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 3 μήνες, η οδοντόβουρτσα πρέπει να φορτίσει για 24 ώρες. Η οδοντόβουρτσα διαθέτει να θερμανθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει βλάβη.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, συνιστούμε να αποσυνδέτετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα.
- Μετά από κάθε φόρτιση, η οδοντόβουρτσα λειτουργεί για έως και 3 εβδομάδες με τακτική χρήση.
- Αν και μπορείτε να φορτίσετε ξανά την οδοντόβουρτσα μετά από πλήρη φόρτιση, συνιστούμε, προκειμένου να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, να την φορτίζετε ανά τακτικά διαστήματα (π.χ. μετά από χρήση 2-3 εβδομάδων).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

- Η θήκη ταξιδίου προστατεύει την οδοντόβουρτσα και τα εξαρτήματά της από τυχόν απώλεια, γρατσουνές και ακαθαρσίες τόσο όταν ταξιδεύετε όσο και όταν βρίσκεστε στο σπίτι. Εκτός αυτού, διαθέτει υποδοχή micro USB, όπου συνέβεται το καλώδιο USB που παρέχεται προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να φορτίσετε την μπαταρία εάν χρειαστεί.
- Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη θήκη.
- Συνδέστε το καλώδιο με τον ουδέτερο micro USB στη θήκη. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου είτε σε συμβατό προσαρμογέα ρεύματος USB και έπειτα συνδέστε τον προσαρμογέα με μια πρίζα, ή συνδέστε τον με μια θύρα USB σε κάποια κατάλληλη συσκευή, όπως π.χ. πλεκτρονικό υπολογιστή, notebook, κ.λπ.). Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα και η ένδειξη μπαταρίας LED στο κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας θα ανάψει.
- Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, η ένδειξη LED θα ανάψει με μπλε χρώμα. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη θήκη ταξιδίου και από την πηγή ρεύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Θησάνστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας στον άξονα σύνδεσης του κύριου μέρους της οδοντόβουρτσας. Η παραμένει ένα μικρό κενό ανάμεσα στο κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας και τον χρωματιστό δακτύλιο στην κεφαλή, το οποίο όμως δεν αποτελεί ελάττωμα. Για την αφίσεων της κεφαλής, εκτελέστε το βήματα με την αντιστροφή σειρά.
- Βρείτε την οδοντόβουρτσα και εφαρμόστε μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας. Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα πιέζοντας τον κεντρικό διακόπτη.
- Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εναλλαγής λειτουργίας, για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργίας καθαρισμού:
CLEAN – λειτουργία για τυπικό καθαρισμό μιας υγιούς οδοντοστοιχίας;
SOFT – απαλή λειτουργία για ευαίσθητα δόντια και ούλα;
WHITEN – λειτουργία κατάλληλη για τη λεύκανση των δοντιών;
MASSAGE – παλμική λειτουργία για απαλό μασάζ των ούλων Η ένδειξη LED της επιλεγμένης λειτουργίας θα ανάψει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε τη συσκευή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή της. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας θα βοηθήσει στην αποφυγή των φρυγάνων επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληρωφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, αν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιπρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξικονόληπτη πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων.

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επικειρότητες με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληρωφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληρωφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu