

beurer

FM 200



CS Masážní přístroj na Achillovy šlachy
Návod k použití.....2

SK Masážny prístroj na Achillové šlachy
Návod na obsluhu..... 10

CE

Obsah

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| 1. K seznámení..... | 3 | 6. Použití | 7 |
| 2. Použití v souladu s určením | 3 | 7. Čištění a uložení | 9 |
| 3. Bezpečnostní pokyny..... | 4 | 8. Co dělat v případě problémů? | 9 |
| 4. Popis přístroje | 6 | 9. Technické údaje | 9 |
| 5. Uvedení do provozu | 6 | 10. Záruka/servis..... | 10 |



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

S pozdravem
váš tým Beurer

Obsah balení

- Achillomed®
- síťový adaptér
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

Vysvětlení symbolů

V návodu a na typovém štítku jsou uvedeny tyto symboly:



VAROVÁNÍ

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



POZOR

Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/ příslušenství.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.



Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorech.



Zelený bod: německý duální systém likvidace odpadu



Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.

1. K seznámení

Achillova šlacha je silná šlacha na lidském těle. Při běhu/chůzi je vystavena velmi intenzivnímu namáhání. Zejména u sportovců, např. běžců, se mohou z důvodu přílišného nebo chybného zatížení objevit bolestivé záněty Achillovy šlachy.

Achillomed® FM 200 byl vyvinut speciálně ke zmírnění bolestí při problémech s Achillovou šlachou. Achillomed® má šest rotujících masážních hlavice, které mohou příjemnou masáží zlepšit problémy s Achillovou šlachou.

Achillomed® dále nabízí tyto výhody:

- jednoduché ovládání
- 2 rychlosti masáže
- 2 směry masáže
- podsvícený LED ukazatel
- snímatelné masážní hlavice pro hygienické a snadné čištění
- podložka na nohu s možností nastavení výšky a vzdálenosti pro komfortní použití

2. Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výlučně k masáži lidské Achillovy šlachy. Přístroj je určen pouze pro **vlastní potřebu**, ne pro lékařské nebo komerční účely. Nemůže nahradit lékařské ošetření. Nepoužívejte přístroj, pokud pro vás platí jedno či více následujících varovných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vás vhodný, zeptejte se svého lékaře. Přístroj je určen pouze k účelu užívání popsáném v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

3. Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití! Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věčné škody. Ušchovejte tento návod k použití a poskytněte ho i dalším uživatelům. Předajte tento návod při předání přístroje jiné osobě.



VAROVÁNÍ

Přístroj nepoužívejte

- u zvířat,
- při patologické změně nebo zranění Achillovy šlachy (např. otevřená rána),
- pokud máte kardiostimulátor,
- během těhotenství,
- na obličej (na očích), na hrtanu a jiných zvlášť citlivých místech těla,
- k masáži nohou,
- nikdy během spánku,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
- při jízdě motorovým vozidlem.

Před použitím přístroje se obraťte na svého lékaře především tehdy,

- pokud trpíte nějakou těžkou chorobou nebo jste prodělali operaci Achillovy šlachy,
- pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomocné prostředky,
- při trombóze, diabetu nebo bolestech nejasného původu.



VAROVÁNÍ

Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Zasažení elektrickým proudem



VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i Achillomed® opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a pod napětím, které je uvedeno na adaptéru,
- nepoužívejte nikdy, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady,
- nepoužívejte při bouřce.

Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi napájecím kabelem a teplým povrchem přístroje. Napájecí kabel nikam neupínejte, nelámejte ho, ani ho nezamotávejte. Do přístroje nezapichujte žádné špendlíky nebo špičaté předměty.

Zajistěte, aby se přístroj, síťový adaptér a napájecí kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. Používejte přístroj proto jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně).

Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelné závady.

Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevyšel z rukou.

Opravy



VAROVÁNÍ

- Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru



VAROVÁNÍ

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

Přístroj proto

- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem, ...
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.

Manipulace



POZOR

Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.

- Nevkládejte žádné předměty mezi rotující masážní hlavice. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy volně pohybovat.
- Na pohyblivé části přístroje si nesedějte, nelehejte ani na nich nestůjte.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.

Likvidace



POZOR

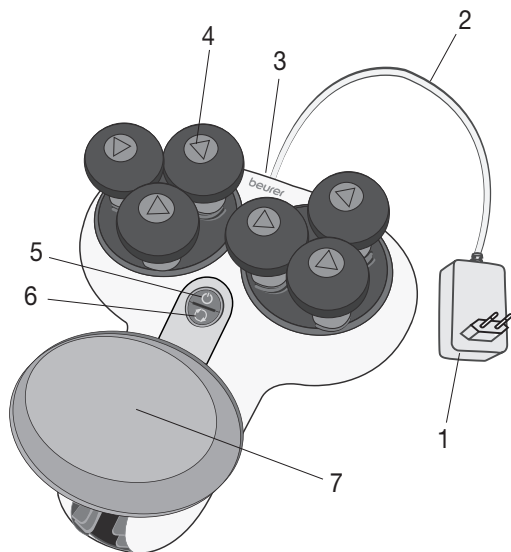
V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.



Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.




4. Popis přístroje



1. Síťový adaptér
2. Napájecí kabel
3. Zdířka pro adaptér
4. 2x 3 rotující masážní hlavice
5. Tlačítko 
1x stisknout = nízký masážní stupeň
2x stisknout = vysoký masážní stupeň
3x stisknout = vypnutí přístroje
6. Tlačítko 
(2 rychlosti masáže)
7. Podložka na nohu s možností nastavení výšky a vzdálenosti

5. Uvedení do provozu

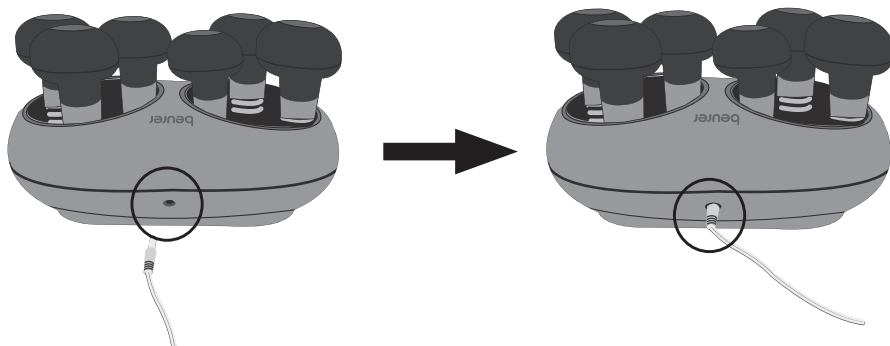- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér nebo kabel nejsou poškozeny.
- Zasuňte přípojovací konektor napájecího kabelu do zdířky pro síťový adaptér.
- Napájecí kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.




6. Použití

Upozornění


- Achillomed® používejte max. 15 minut denně. Při delším trvání masáže může nadměrná stimulace svalů vést k jejich napětí místo k uvolnění.
- Achillomed® je vybaven funkcí automatického vypnutí, která je nastavena na maximální provozní dobu 15 minut. Pokud při používání přístroje změňte rychlost nebo směr masáže, začne časovač automatického vypnutí počítat od začátku (15 minut).
- Achillomed® můžete používat naboso nebo s ponožkami. Pro zajištění optimální účinnosti masáže doporučujeme používat Achillomed® naboso.

Při používání Achillomedu® postupujte takto:

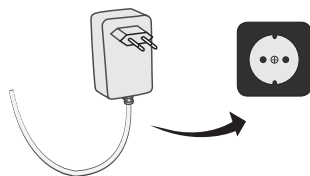1. Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Napájecí kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.




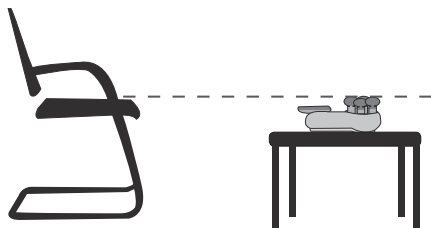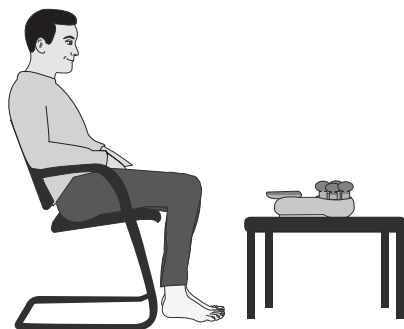2. Položte Achillomed® na vyvýšené místo. Dbejte na to, aby se Achillomed® nacházel přibližně ve výši vaší sedací plochy (například židle nebo pohovka).




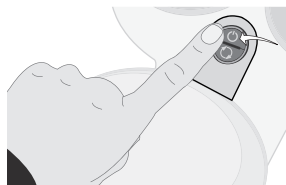
3. Posadte se na židli (nebo podobnou možnost sezení) před položený Achillomed®.

 **VAROVÁNÍ** Nebezpečí zakopnutí! Nikdy nepoužívejte Achillomed® vestoje.



4. Na Achillomedu® stiskněte tlačítko . Masážní hlavice začínají rotovat.

 **VAROVÁNÍ** Nebezpečí pohmoždění! Nevkládejte nebo netlačte ruce, prsty nebo vlasy mezi rotující masážní hlavice.








5. Položte nohu s ošetřovanou Achillovou šlachou opatrně na Achillomed®. Dbejte na to, aby se Achillova šlacha nacházela ve středu mezi rotujícími masážními hlavicekami. Masáž by měla být vždy příjemná a uvolňující. Masáž přerušete nebo změňte polohu nohy, pokud masáž pociťujete jako bolestivou nebo nepříjemnou.

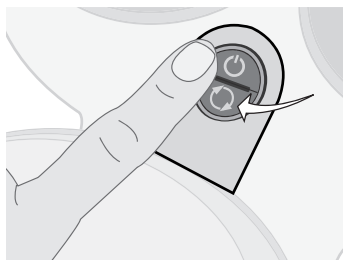
Polohu nohy můžete individuálně upravit pomocí podložky na nohu s možností nastavení výšky a vzdálenosti.



Také můžete položit druhou nohu na ošetřovanou nohu. Můžete tak dodatečně regulovat intenzitu masáže.




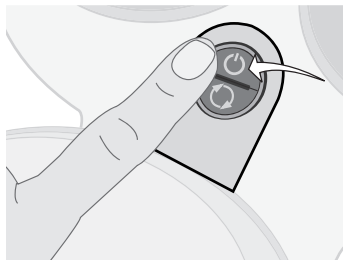
6. Směr masáže změňte stisknutím tlačítka . Podle směru masáže svítí kontrolka LED vlevo nebo vpravo na tlačítku .

Pokud podržíte tlačítko  stisknuté půl sekundy, přejde Achillomed® do masážního programu. Kontrolky LED vlevo a vpravo na tlačítku  se rozsvítí. Směr masáže je nyní řízen automaticky. Automatický masážní program vypnete stisknutím tlačítka .



7. Rychlost masáže zvýšíte opětovným stisknutím tlačítka . Achillomed® vypnete stisknutím tlačítka .

 **Upozornění** Doporučujeme počátkem nižší rychlost masáže, abyste si na Achillomed® pomalu zvykli.



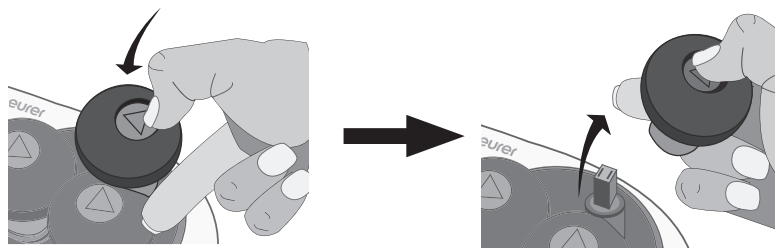
7. Čištění a uložení

Čištění



VAROVÁNÍ

- Před čištěním vždy odpojte adaptér od sítě i od přístroje.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se do přístroje nebo jeho příslušenství nesmí dostat žádná tekutina.
- Menší skvrny lze odstranit utěrkou nebo navlhčenou houbičkou a případně malým množstvím tekutého prostředku na jemné prádlo. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Pro hygienické čištění můžete jednotlivé masážní hlavice vyjmout. Zatlačte na trojúhelník na masážní hlavici a vysuňte ji nahoru. Masážní hlavice čistěte navlhčenou utěrkou a případně malým množstvím tekutého prostředku na jemné prádlo. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla. Vyčištěné masážní hlavice opět nasadte na Achillomed[®], až když jsou zcela suché.




- Přístroj opět použijte, jestliže je úplně suchý.

Uložení

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme uložit ho v originálním obalu na suché místo, ničím ho nezatažujte. Na masážní hlavice nestavte žádné předměty.

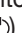8. Co dělat v případě problémů?

| Problém | Příčina | Odstranění |
|--------------------------------|---|---|
| Masážní hlavice rotují pomalu. | Masážní hlavice jsou příliš zatěžovány. | Uvolněte masážní hlavice. |
| Masážní hlavice se nepohybují. | Přístroj není připojen k síti. | Zapojte síťový adaptér a zapněte přístroj (tlačítko ) |

9. Technické údaje

| | |
|---------|------------------------------|
| Vstup: | 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,45 A |
| Výstup: | 15,0V === 1,0A |

10. Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.
Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.
2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

Obsah

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|----|
| 1. Na oboznámenie sa | 12 | 6. Použitie..... | 16 |
| 2. Použitie podľa určenia..... | 12 | 7. Čistenie a uskladnenie | 18 |
| 3. Bezpečnostné upozornenia | 13 | 8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?. | 18 |
| 4. Popis prístroja | 15 | 9. Technické údaje | 18 |
| 5. Uvedenie do prevádzky | 15 | 10. Záruka/servis..... | 19 |



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskôršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, krásy, detí a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
váš tím Beurer

Obsah balenia

- Achillomed®
- Sieťový zdroj
- Tento návod na obsluhu

VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

Vysvetlenie symbolov

V návode na obsluhu a na typovom štítku sú použité tieto symboly:



VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia.



POZOR

Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve.



Upozornenie

Upozornenie na dôležité informácie.



Prístroj je vybavený dvojitou ochrannou izoláciou a teda zodpovedá triede ochrany 2.



Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch.



Zelený bod: nemecký duálny systém likvidácie odpadov



Obal ekologicky zlikvidujte.

1. Na oboznámenie sa

Achillova šľacha je najsilnejšia šľacha ľudského tela. Pri behu/chôdzi je vystavená mimoriadne silnému zaťaženiu. Špeciálne u športovcov, ako napríklad bežcov, sa môžu pri pretrvávajúcom nadmernom a chybnom zaťažení vyskytnúť bolestivé zápaly Achillovej šľachy.

Achillomed® FM 200 bol špeciálne vyvinutý na zmiernenie problémov s Achillovou šľachou. Achillomed® má šesť rotujúcich masážnych hlavíc, ktoré môžu zlepšiť problémy Achillovej šľachy pomocou blahodarnej masáže.

Achillomed® vám okrem toho ponúka nasledujúce výhody:

- jednoduché ovládanie,
- 2 rýchlosti masáže,
- 2 masážne smery,
- osvetlený LED ukazovateľ,
- odnímateľné masážne hlavice pre hygienické a ľahké čistenie,
- výškovo a šírkoovo nastaviteľná podnožka pre komfortnú aplikáciu.

2. Použitie podľa určenia

Tento prístroj je určený výlučne na masáž ľudskej Achillovej šľachy. Prístroj je určený len **na osobné použitie**, nie na lekárske alebo komerčné použitie. Prístroj nemôže nahradiť liečbu lekárom. Prístroj nepoužívajte, ak sa na vás vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vás prístroj vhodný, poraďte sa so svojim lekárom. Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

3. Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si tento návod na obsluhu pozorne! Pri nedodržaní nasledujúcich upozornení môže dôjsť k škodám na zdraví osôb alebo vecným škodám. Uchovajte tento návod na obsluhu a sprístupnite ho aj iným používateľom. Pri postúpení tohto prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod na obsluhu.



VÝSTRAHA

Prístroj nepoužívajte

- pri zvieratách,
- pri chorobných zmenách alebo zraneniach Achillovej šľachy (napr. otvorené rany),
- ak máte kardiostimulátor,
- počas tehotenstva,
- na tvári (očiach), na hrtane alebo inej obzvlášť citlivej časti tela,
- na masáž chodidiel,
- nikdy počas spánku,
- po užití liekov alebo alkoholu (obmedzená schopnosť vnímania!),
- v motorovom vozidle.

Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím lekárom, a to predovšetkým

- ak trpíte závažným ochorením alebo ste podstúpili operáciu Achillovej šľachy,
- ak máte kardiostimulátor, implantáty alebo iné pomôcky,
- pri trombózach, diabete alebo bolestiach neznámeho pôvodu.



VÝSTRAHA

Obal uchovávajúce mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Zásah elektrickým prúdom



VÝSTRAHA

S Achillomedom[®] je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretne, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Preto

- prístroj používajte len s dodaným sieťovým zdrojom a so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom zdroji,
- nepoužívajte prístroj alebo príslušenstvo pokiaľ sú viditeľne poškodené,
- nepoužívajte prístroj počas búrky.

Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy, a odpojte ho z elektriny. Neťahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky. Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj za sieťový kábel. Dodržujte odstup medzi napájacím káblom a teplým povrchom. Napájací kábel neprivierajte, nelámete ani netočte. Do prístroja nezasúvajte žiadne ihly alebo ostré predmety.

Uistite sa, že prístroj, sieťový zdroj ani napájací kábel neprichádza do styku s vodou, parou ani inými tekutinami. Používajte prístroj len v suchých miestnostiach (napr. nikdy nie vo vani, saune).

V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky. Prístroj nepoužívajte, ak je prístroj alebo príslušenstvo viditeľne poškodené.

Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.

Oprava



VÝSTRAHA

- Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa, prosím, obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru



VÝSTRAHA

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto návodu na obsluhu hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

Preto

- prístroj nikdy nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom ...
- prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.

Manipulácia



POZOR

Po každom použití a pred každým čistením musíte prístroj vypnúť a vytiahnuť zo zásuvky.

- Medzi rotujúce masážne hlavice nekladajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať.
- Nesadajte, neležte a nestojte celou váhou na pohyblivých častiach prístroja.
- Na prístroj nekladte žiadne predmety.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.

Likvidácia



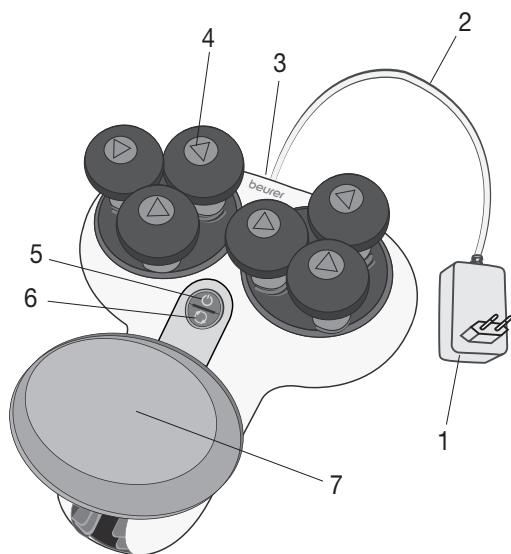
POZOR



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberní vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.




4. Popis prístroja



1. Sieťový zdroj
2. Napájací kábel
3. Zdieľka sieťového zdroja
4. 2×3 rotujúce masážne hlavice
5. Tlačidlo 
1 stlačenie = nízky masážny stupeň
2 stlačenia = vysoký masážny stupeň
3 stlačenia = vypnutie prístroja
6. Tlačidlo 
(2 masážne smery)
7. Výškovo a šírko nastaviteľná podnožka

5. Uvedenie do prevádzky

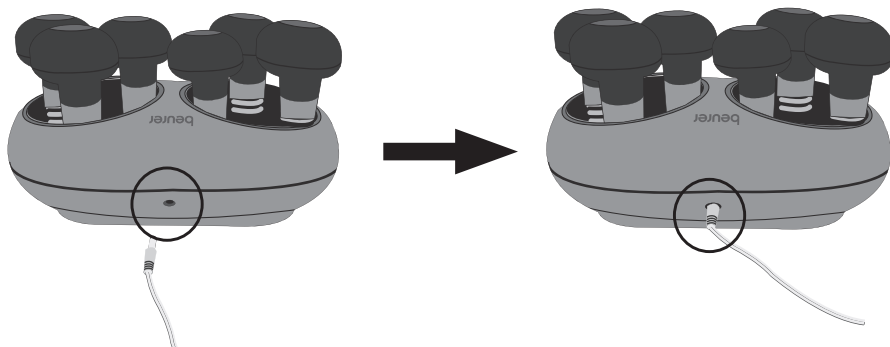- Odstráňte balenie.
- Skontrolujte prístroj, sieťový zdroj a napájací kábel, či nie sú poškodené.
- Zasuňte pripojovací konektor napájacieho kábla do zdieľky sieťového zdroja na prístroji.
- Napájací kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.




6. Použitie

Upozornenie


- Achillomed® používajte max. 15 minút denne. Pri dlhšej masáži môže priveľká stimulácia Achillovej šľachy viesť k preťaženiu namiesto uvoľnenia.
- Achillomed® disponuje automatickým vypínaním, ktoré je nastavené na maximálnu prevádzkovú dobu 15 minút. Keď počas aplikácie zmeníte rýchlosť alebo smer masáže, začne časovač automatického vypínania počítať opäť do začiatku (15 minút).
- Achillomed® môžete používať naboso alebo s ponožkami. Aby bol zaručený optimálny účinok masáže, odporúčame vám Achillomed® používať naboso.

Pre začatie aplikácie s Achillomedom® postupujte nasledovne:

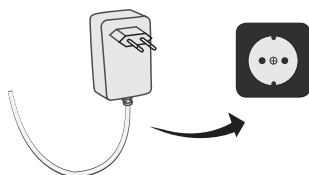
1. Sieťový zdroj zapojte do vhodnej sieťovej zástrčky. Nabíjací kábel uložte tak, aby nehrozilo zakopnutie.




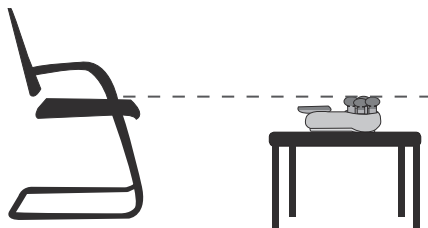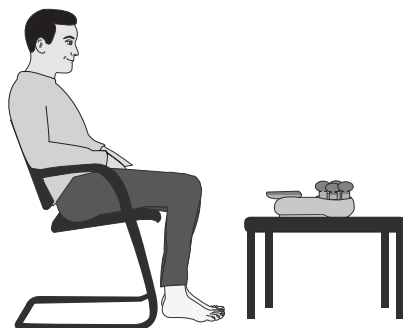
2. Achillomed® položte na vyvýšenú podložku. Dbajte na to, aby sa položený Achillomed® nachádzal približne vo výške vašej plochy na sedenie (napríklad stolička alebo pohovka).




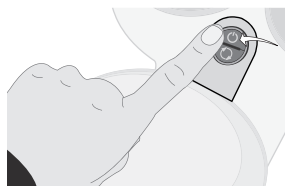
3. Posadte sa na stoličku (alebo podobný predmet na sedenie) pred položeným Achillomedom®.

 **VÝSTRAHA** Nebezpečenstvo zakopnutia! Achillomed® nikdy nepoužívajte v stoji.



4. Na Achillomede® stlačte tlačidlo . Masážne hlavice začínajú rotovať.

 **VÝSTRAHA** Nebezpečenstvo stlačenia! Medzi rotujúce masážne hlavice nezachytávajte a nekladajte ruky, prsty alebo vlasy.








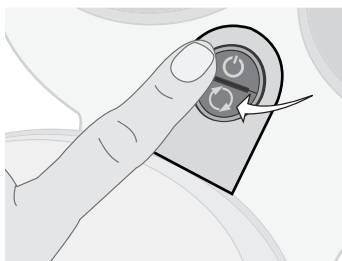
5. Opatrne položte nohu s Achillovou šľachou, ktorá sa má ošetrovať, na Achillomed®. Dávajte pozor na to, aby sa Achillova šľacha nachádzala v strede medzi rotujúcimi masážnymi hlavicami. Masáž musí vždy pôsobiť príjemne a uvoľňujúco. Masáž prerušte alebo zmeňte polohu vašej nohy, ak je pre vás masáž bolestivá alebo nepríjemná.



Polohu vašej nohy môžete individuálne prispôbiť s pomocou výškovo a šírkoovo nastaviteľnej podnožky.


Vašu druhú nohu môžete tiež položiť na ošetrovanú nohu. Takto môžete dodatočne regulovať intenzitu masáže.

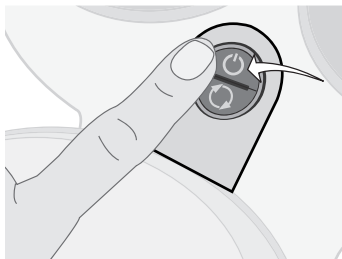


6. Na zmenu smeru masáže stlačte tlačidlo . V závislosti od smeru masáže svieti LED naľavo alebo napravo od tlačidla . Keď tlačidlo  podržíte stlačené na pol sekundy, prejde Achillomed® do masážneho programu. LED naľavo a napravo od tlačidla  začnú svietiť. Smer masáže je teraz riadený automaticky. Ak chcete automatický masážny program opäť vypnúť, stlačte tlačidlo .



7. Na zvýšenie rýchlosti masáže znovu stlačte tlačidlo . Na vypnutie prístroja Achillomed® stlačte znovu tlačidlo .

 **Upozornenie** Na začiatku vám odporúčame začať s nižšou rýchlosťou masáže, aby ste si pomaly zvykli na Achillomed®.




7. Čistenie a uskladnenie

Čistenie



VÝSTRAHA

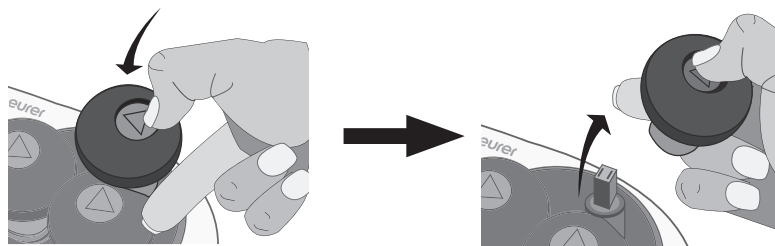- Pred každým čistením vyťahnite sieťový zdroj zo zásuvky a odpojte ho od prístroja.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva sa v žiadnom prípade nesmie dostať žiadna kvapalina.
- Malé flaky je možné odstrániť utierkou alebo vlhkou špongiou a príp. malým množstvom jemného pracieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Pre hygienické čistenie môžete masážne hlavice odobrať aj jednotlivo. Za tým účelom stlačte trojuholník na masážnych hlaviciach a vyťahnite ho smerom nahor. Masážne hlavice vyčistite vlhkou utierkou a prípadne malým množstvom tekutého jemného pracieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá. Vyčistené masážne hlavice nasadte späť na Achillomed® až po úplnom vyschnutí.




- Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

Uskladnenie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho uschovať v originálnom balení v suchom prostredí a bez zaťaženia. Na masážnu hlavicu nekladte žiadne predmety.

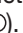8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?

| Problém | Príčina | Odstránenie |
|-----------------------------------|--|---|
| Masážne hlavice rotujú spomalene. | Masážne hlavice sú príliš zaťažené. | Masážne hlavice uvoľnite. |
| Masážne hlavice sa nepohybujú. | Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete. | Zapojte sieťový zdroj a zapnite prístroj (tlačidlo ). |

9. Technické údaje

| | |
|---------|-----------------------------|
| Vstup: | 100 – 240V~, 50/60Hz, 0,45A |
| Výstup: | 15,0V=== 1,0A |

10. Záruka/servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolaných osôb;
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4. Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

