

SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**





ÚSTNA SPRCHA
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**

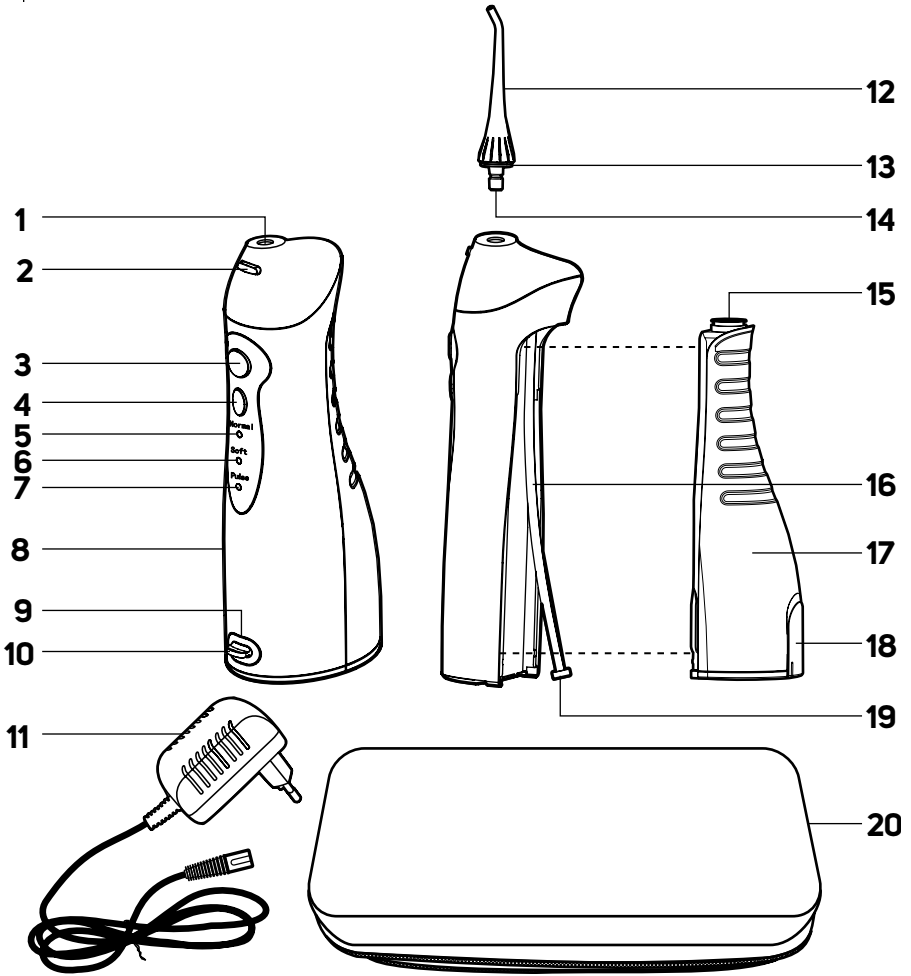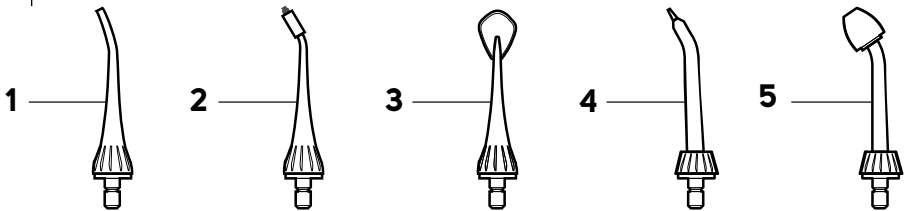

A**B**

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Ústne sprchy môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí pod dozorom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Ústne sprchy sa musia používať iba so studenou alebo teplou vodou alebo so zvláštnymi roztokmi definovanými v tomto návode.
- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.



Upozornenie:

Spotrebič sa musí používať iba s originálnym sieťovým adaptérom, ktorý sa s ním dodáva. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ adaptéra.

- Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným malým napätím zodpovedajúcim označeniu spotrebiča.

Elektrická bezpečnosť

- Sieťový adaptér neodpájajte od zásuvky (ahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra alebo zásuvky. Sieťový adaptér odpájajte od zásuvky (ahom za zástrčku.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Sieťový adaptér dodávaný s týmto spotrebičom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Sieťový adaptér a jeho prívodný kábel udržiavajte v suchu.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra neomotávajte okolo rukoväti spotrebiča.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra neprípájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami.
- Pred pripojením sieťového adaptéra k zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabíjajte dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý je možné vymeniť iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať a vymeniť za nový svojpomocne.



Výstraha:

Spotrebič nikdy nezoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskrutujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach, tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pokiaľ bol spotrebič pripojený cez adaptér k sieti a spadne aj s prívodným káblom do vody, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte sieťový adaptér, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo kontaktujte dodávateľa spotrebiča so žiadosťou o nový adaptér.

Bezpečnosť pri používaní

- Táto ústna sprcha je určená výhradne na čistenie zubov a ústnu hygienu osôb. Ústna sprcha nie je určená na komerčné účely alebo na čistenie zubov zvierat.
- Ústnu sprchu a jednotlivé násadce používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Ak ste v nedávnom období podstúpili intenzívny zákrok ako napríklad operáciu zubov či ďasien, trpeli dlhodobými ťažkosťami so zubami alebo ak máte podozrenie na problémý zubného charakteru (plomby, korunky atď.), poraďte sa pred použitím ústnej sprchy so svojím zubným lekárom.
- Ak po použití ústnej sprchy dochádza ku krvácaniu ďasien alebo ak krvácanie neprestáva po 2 týždňoch používania, obráťte sa na svojho zubného lekára.
- Ak máte akékoľvek zdravotné pochybnosti, obráťte sa pred použitím ústnej sprchy na svojho zubného lekára.
- Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu ústnej sprchy (rukoväť alebo sieťový adaptér), prestaňte ju používať.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s touto ústnou sprchou. Nepoužívajte iné násadce než tie, ktoré sú dodané výrobcom.
- Ústna sprcha a jej sieťový adaptér sa musia používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Ústnu sprchu nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Ústnu sprchu a jej príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Ústnu sprchu a jej príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.

**Výstraha:**

Ústnu sprchu udržujte v suchu.

- Pred každým použitím sa presvedčte, že ústna sprcha a násadce nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte ústnu sprchu s poškodeným násadcom.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k miernemu zahrievaniu ústnej sprchy. To je úplne normálny jav.
- Na koniec násadca s dýzou príliš netlačte.
- Aby ste predišli zraneniu, neplňte nádržku horúcou vodou. Do nádržky nekladajte žiadne predmety.
- Dýzou násadca nemierte pod jazyk, do ucha, nosa, očí alebo ďalších citlivých oblastí, mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Nečistite násadce s dýzou, rukoväť, sieťový adaptér alebo nádržku na vodu v umývačke alebo mikrovlnnej rúre.
- Ústnu sprchu vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, ak ju nechávate bez dozoru a pred prípevnením, odobratím alebo výmenou násadcov, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Ústnu sprchu a jej sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Ústnu sprchu udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na ústnej sprche nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jednotlivých súčastí sprchy popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nepoužívajte ústnu sprchu, pokiaľ spadla na zem, pokiaľ nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodená.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, ústnu sprchu ani jej príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

SK Ústna sprcha

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálneho škatule od výrobcu.

POPIS ÚSTNEJ SPRCHY A JEJ PRÍSLUŠENSTVA

A1 Otvor na násadce	A11 Sieťový adaptér
A2 Tlačidlo na uvoľnenie násadca z dýzou	A12 Násadec s dýzou
A3 Spúšťacia a vypínacie tlačidlo	A13 Označujúci krúžok
A4 Prepínač režimov	A14 Upevňovací čap pre násadce
A5 Indikátor režimu Normal	A15 Horný plniaci otvor nádržky
A6 Indikátor režimu Soft	A16 Nasávacia trubička
A7 Indikátor režimu Pulse/indikátor nabíjania	A17 Nádržka na vodu s objemom 150 ml
A8 Rukoväť	A18 Kryt dolného plniaceho otvoru nádržky
A9 Nabíjacia zdierka	A19 Filter nasávacej trubičky
A10 Krytka nabíjacej zdierky	A20 Cestovné puzdro

- | | |
|---|---|
| B1 Štandardný násadec
Vhodný na bežné čistenie, odstraňovanie baktérií medzi zubami a v spoji medzi zubom a ďasnom. | B3 Násadec na čistenie jazyka
Vhodný na čistenie jazyka a tváre, odstraňovanie baktérií, zvyškov jedál a odumretých buniek z povrchu. |
| B2 Ortodontický násadec
Vhodný na čistenie pri nosení vyrovnávačov zubor alebo ťažko prístupných miest na mostík. | B4 Násadec na čistenie priehlbín
Vhodný na čistenie horšie dostupných alebo citlivých miest. |
| | B5 Násadec na čistenie nosnej dutiny
Vhodný na čistenie nosnej dutiny od prachu, peľu atď. |

ÚČEL POUŽITIA

- Ústna sprcha je určená výhradne na ústnu hygienu. Pomáha odstraňovať baktérie z medzizubných priestorov a záhybov dasna v okolí zubov, odstraňuje rýchlou a šetrne zvyšky jedla z medzizubných priestorov, a súčasne efektívne masíruje vaše dasná. V kombinácii s dôkladným čistením zubov vám pomáha aktívne sa starať o zdravie vašich zubov. Ústna sprcha je určená na používanie v domácnostiach, nie je určená na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Opláchnite všetky násadce **B1** až **B5** pod tečúcou vodou.
- Vypláchnite niekoľkokrát nádržku na vodu **A17** nad umývadlom a naplňte ju čistou vodou podľa kapitoly Naplnenie nádržky na vodu. Zasuňte násadec **B1** do ústnej sprchy podľa kapitoly Prípravenie a vybratie násadcov. Nasmerujte dýzu násadca do umývadla

a zapnite ústnu sprchu tlačidlom **A3**. Prepínačom režimov **A4** zvolte režim Normal a nechajte vodu chvíľu prúdiť cez dýzu, aby ste prepláchli tak nasávacia trubičku **A16**, ako aj dýzu násadca. Rovnaký postup použite aj pre násadce **B2** až **B5**.

NABÍJANIE ÚSTNEJ SPRCHY

- Ústna sprcha je vybavená vstavaným lítium-iónovým akumulátorom, ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje bezkábluv prevádzku ústnej sprchy. Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte akumulátor ústnej sprchy najprv plne nabíť. Nabíjanie akumulátora do plného stavu trvá približne 8 hodín. Na nabíjanie ústnej sprchy používajte iba originálny sieťový adaptér **A11**.



Varovanie:

V okolí nabíjacej zdierky **A9** alebo jej krytu **A10** nesmie byť žiadna vlhkosť. Preto pred zapojením sieťového adaptéra odporúčame utrieť rukoväť **A8** dosucha.

- Ťahom vyberte krytku nabíjacej zdierky **A10** a do zdierky **A9** zapojte konektor sieťového adaptéra **A11**. Vidlicu sieťového adaptéra **A11** pripojte k sieťovej zásuvke. Nabíjanie je indikované blikaním indikátora **A7**.



Poznámka:

Počas nabíjania je blokovávané použitie ústnej sprchy a nie je možné ju spustiť.

- Hneď ako je akumulátor plne nabitý, indikátor **A7** trvalo svieti. Najprv vytiahnite vidlicu sieťového adaptéra **A11** zo sieťovej zásuvky a až potom odpojte konektor sieťového adaptéra od zdierky **A10**. Zasuňte späť krytku nabíjacej zdierky **A10**.



Upozornenie:

Ústnu sprchu nenechávajte pripojenú k vonkajšiemu zdroju energie dlhšie, než je potrebné na jej úplné nabitie.

- Plne nabitý akumulátor zaisti zhruba 56 minút prevádzky alebo 2 týždne prevádzky pri dvoch čisteniach denne. Potom je potrebné akumulátor znovu nabiť.
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora odporúčame:
 - Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, ústnu sprchu nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
 - Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
 - Ak ústnu sprchu nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

NAPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

- Nádržku na vodu **A17** môžete naplniť bez toho, aby ste ju museli odobrať z rukoväti **A8**. Vypnutú ústnu sprchu podržte vodorovne. Otvorte kryt dolného plniaceho otvoru **A18**, nádržku naplňte vodou a kryt riadne uzavrite. Starostlivo utrite akúkoľvek rozliatu vodu.

**Tip:**

Na plnenie nádržky na vodu **A17** môžete okrem čistej vody použiť aj ústnu vodu alebo jej roztok. Užítie ústnej vody robí používanie ústnej sprchy ešte účinnejšie. Nepoužívajte však ústnu vodu obsahujúcu izopropylmyristát alebo vysokú koncentráciu esenciálnych olejov. Tieto látky sú zahrnuté v ústnych vodách, predávaných v sklenených a keramických nádobách a mohli by poškodiť nádržku na vodu **A17** aj vnútorné časti ústnej sprchy. Ústne vody, ktoré obsahujú látky neškodné pre ústnu sprchu, sa predávajú v plastových nádobách.

**Upozornenie:**

Voda by mala mať príjemnú teplotu. Nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C.

- Nádržku na vodu **A17** je tiež možné naplniť mimo ústnej sprchy. Jednou rukou uchopte rukoväť **A8**, druhou rukou uchopte nádržku na vodu **A17** a (tahom smerom dole ju vysuňte von z drážok vnútri rukoväti **A8**. Dbajte na to, aby ste nepoškodili nasávaciu trubičku **A16**. Naplňte nádržku **A17** vodou cez horný plniaci otvor **A15**. Neprepĺňujte. Starostlivo utrite akúkoľvek rozliatu vodu. Pred spätným zasunutím nádržky **A17** do rukoväti **A8** najprv vložte do nádržky **A17** nasávaciu trubičku **A16** a až potom zasuňte nádržku **A17** späť do drážok vnútri rukoväti **A8**.

PRÍPEVENIE A VYBRATIE NÁSADCE

- Násadce s dýžou **B1** až **B5** sú dodané s rôznofarebnými krúžkami **A13** a je možné ich tak rozlíšiť pre ďalšie osoby, napr. členov rodiny.
- Zvoľte požadovaný násadec a jeho čap **A14** zasuňte zhora kolmo do otvoru **A1** v rukoväti sprchy **A8**. Rukoväť **A8** pritom držte tak, aby nedošlo k stlačeniu tlačidla **A3**.
- Na vybratie násadca stlačte a držte tlačidlo **A2** a násadec vyberte kolmo hore z otvoru **A1**.

POUŽITIE ÚSTNEJ SPRCHY

- Skôr ako začnete ústnu sprchu používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.
- Naplňte nádržku **A17** čerstvou vodou.
- Zvoľte vhodný typ násadca a pripevnite ho k ústnej sprche. Pred každým použitím sa presvedčte, že násadec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte ústnu sprchu s poškodeným násadcom.
- Stlačte prepínač režimov **A4**, kým sa nerozsvieti indikátor požadovaného režimu:
 - indikátor **A5**, režim Normal: Normálny prúd vody, vhodný na bežné čistenie.
 - indikátor **A6**, režim Soft: Mierny prúd vody, vhodný na jemné čistenie citlivých dasien.
 - indikátor **A7**, režim Pulse: Čistenie dasien s masážou.

**Poznámka:**

Režim je možné meniť aj v priebehu ostrekovania.

- Vsuňte násadec do pootvorených úst a nahnite sa nad umývadlo, aby mohli voda a vypláchnuté zvyšky pokrmov vytečť von.
- Zapnite ústnu sprchu spúšťacím tlačidlom **A3**. Nasmerujte prúd vody na miesto, ktoré chcete ostrieť, teda na medzizubné priestory, okraje zubov alebo na dasná.

**Tip:**

Vrúbkovaná dolná časť každého násadca s dýžou umožňuje otáčanie násadca o 360° dookola a tým poskytuje jednoduchý prístup do všetkých častí úst.

- Pohybujte dýžou násadca pomaly z jedného medzizubného priestoru k druhému. Týmto spôsobom vyčistíte všetky vonkajšie aj vnútorné strany.
- Dôkladne ostriekajte aj okolie vyrovnávačov zubov, koroniek a mostikov.
- Pri masírovaní dasien mierte dýžou kolmo na dasná a ostriekajte aj líniu dasien.

- Hneď ako z dýžy nevychádza žiadna voda, je nádržka na vodu **A17** prázdna. Ústnu sprchu vypnite tlačidlom **A3** a doplňte vodu do nádržky. Pri opätovnom zapnutí sa ústna sprcha automaticky spustí v naposledy zvolenom režime.

**Upozornenie:**

Ak počas prevádzky ústnej sprchy začne blikať indikátor **A7**, znamená to, že je akumulátor takmer vybitý a je nutné ho nabíť podľa kapitoly Nabíjanie ústnej sprchy.

- Na vypnutie ústnej sprchy stlačte tlačidlo **A3**. Násadec s dýžou vyberte z úst, až keď je ústna sprcha vypnutá.

**Poznámka:**

Ústna sprcha je vybavená časovým spínačom, ktorý ju automaticky vypne po dvoch minútach činnosti, takže nemusíte sedieť, ako dlho si už ústa čistíte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA**Upozornenie:**

Na čistenie ústnej sprchy používajte vodu s teplotou do 50 °C alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Na čistenie nepoužívajte drôtenky, riedidlá alebo čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod., aby nedošlo k poškodeniu čisteného povrchu. Pri čistení neponárajte ústnu sprchu do vody.

NÁDRŽKA NA VODU

- Po každom použití celkom vyprázdňte nádržku na vodu **A17**, aby sa v nej nemohli množiť baktérie. Nádržku umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odvapkať a vysušiť.
- Ak ste pri použití ústnej sprchy naliali do nádržky **A17** ústnu vodu alebo jej roztok, je nutné nádržku riadne vypláchnuť. Odporúčame naplniť nádržku **A17** čistou vodou, spustiť chod ústnej sprchy a všetok obsah nádržky nechať vyčerpať do umývadla. Nádržku potom umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odvapkať a vysušiť.

UKOVÄŤ

- Rukoväť **A8** utrite čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť ľahko navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne vytrite dosucha. Priestor na uloženie nádržky na vodu vrátane nasávacej hadičky **A16** vždy utrite do sucha. Nasávaciu trubičku **A16** neohýbajte, nefahajte za ňu ani ňou nekrúťte!

**Upozornenie:**

Rukoväť **A8** nie je určená na umývanie pod vodovodným kohútikom. Ústnu sprchu ani jej sieťový adaptér **A11** nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

NÁSADCE

- Po každom použití vypláchnite využitie násadce vodou, aby ste zamedzili tvorbe usadenín. Následne umyte povrch násadca vodou a potom ho mäkkou utierkou vždy utrite do sucha. Z hygienických dôvodov odporúčame každých šesť mesiacov vymeniť používané násadce za nové.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania pripravte ústnu sprchu podľa pokynu v kapitole Čistenie a údržba. Ústnu sprchu skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Ak chcete ústnu sprchu odložiť na dlhší čas, odporúčame nádržku na vodu **A17** vybrať z rukoväti **A8**.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ústna sprcha po vybalení nefunguje.	Ústna sprcha bola uložená v sklade a nepoužívala sa dlhšie než 3 mesiace.	Nechajte ju aspoň 8 hodín nabíjať.
Ústna sprcha aj po dobíí funguje len niekoľko minút.	Končí životnosť batérie.	Kontaktujte servisné stredisko výrobcu alebo predajcu.
	Čas nabíjania nebol dostatočný.	Nechajte sprchu nabíjať aspoň 8 hodín.
Tlak vody je veľmi nízky.	Dýza je zanesená nečistotami.	Vyčistite alebo vymeňte dýzu.
	Dýza je zdeformovaná.	Vymeňte dýzu.
	Filter nasávacej trubičky je zanesený nečistotami.	Vyčistite filter.
Z ústnej sprchy nestrieka voda.	Nádžka na vodu je prázdna.	Doplňte vodu
	Sprcha je prí použití príliš naklonená.	Držte sprchu čo najviac vo zvislej polohe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ústna sprcha

Rozmery vrátane násadca (výška × hĺbka × šírka) 275 × 73 × 56 mm
 Hmotnosť vrátane násadca 265 g
 Objem nádžky 150 ml
 Fekvencia čerpadla 1 400 pulzov/min
 Tlak vody 275 – 620 kPa
 Stupeň krytia pred škodlivým vniknutím vodu..... IPX7

Vstavaný akumulátor

Typ Li-Ion, 5 V/0,6 A

Sieťový adaptér

Menovitý rozsah napätia 100 – 240 V AC
 Menovitý kmitočet 50–60 Hz
 Výstup 5 V DC/0,6 A

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV

Stupeň krytia pred škodlivým vniknutím vody:

IPX7 – Zariadenie je chránené proti škodlivému vniknutiu vody pri ponorení do hĺbky 1 metra počas 30 minút.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdaním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybrať vstavaný akumulátor. Pozor, nasledujúci postup je nevratný! Pred vybratím akumulátora odpojte ústnu sprchu od sieťového adaptéra a nechajte ju celkom vybiť. Vysuňte nádžku na vodu **A17**. Pomocou vhodného nástroja odstráňte dve gumové opierky na spodnej strane rukoväti **A8** a odskrutkujte dve prípevňovacie skrutky. Vedľa nasávacej hadičky **A16**, v hornej časti rukoväti, odskrutkujte ďalšie dve skrutky. Tým uvoľníte kryt a získate prístup do vnútornej časti ústnej sprchy. Odpojte alebo odstráňte vodiče akumulátora a akumulátor vyberte. Vybratie akumulátora môže tiež zaistiť autorizované servisné

stredisko. Ak už bol výrobok raz rozobratý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znovu zostaviť.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

