

SENCOR®

SOC 4103GD



ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®



SOC 4103GD



A

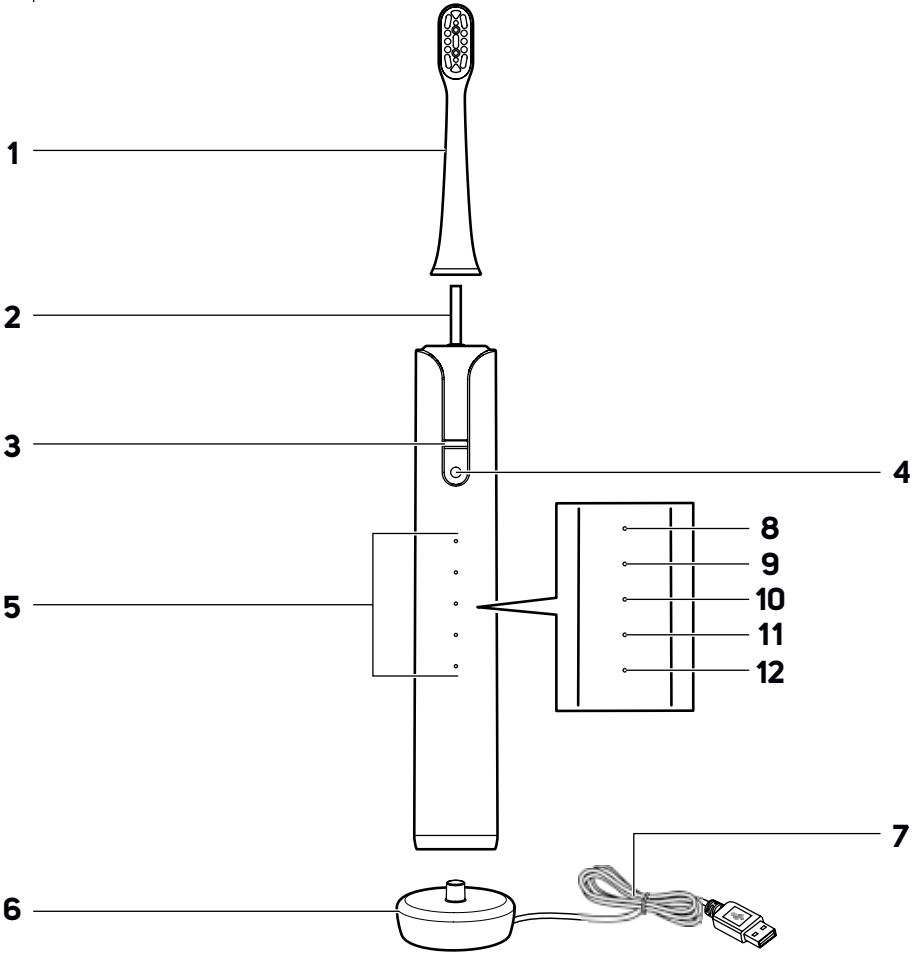

B

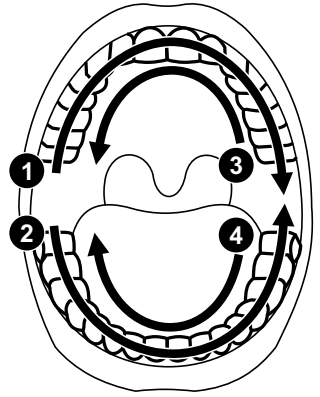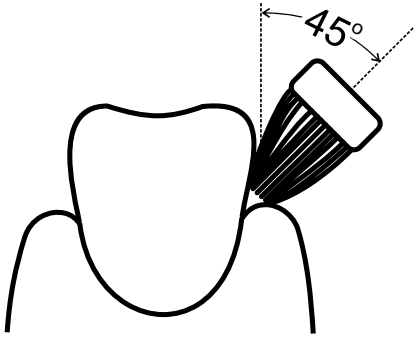

GR Οδοντόβουρτσα

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Τα μέρη της συσκευής που πρέπει να είναι συναρμολογημένα ή τοποθετημένα σε όρθια θέση, πρέπει να συναρμολογηθούν ή να τοποθετηθούν όρθια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.
- Χρησιμοποιείτε τη γνήσια βάση φόρτισης που παρέχεται για τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας. Προτού συνδέσετε τη βάση φόρτισης σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του

ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συμφωνεί με την τάση της πρίζας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πρωτού συνδέσετε τη βάση φόρτισης σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών της συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Προστατεύετε τη βάση και το καλώδιο ρεύματος από την εισορή νερού. Μην το τοποθετείτε κοντά σε δοχεία με νερό, π.χ. νιπτήρες, μπανιέρες κ.λπ., μην το ψεκάζετε με νερό, μην το βυθίζετε στο νερό και μην το πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος της βάσης φόρτισης στον/από τον προσαρμογέα USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το φως του προσαρμογέα ρεύματος USB στο οποίο συνδέεται το καλώδιο ρεύματος της βάσης δεν έρχεται σε επαφή με υγρασία, νερό ή άλλο υγρό. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, στεγνώστε προσεκτικά το φως προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την οδοντόβουρτσα ή από τον προσαρμογέα ρεύματος USB τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φως.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος USB έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου ρεύματος ή προσαρμογέα ρεύματος USB που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη λαβή της οδοντόβουρτσας.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.



Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η ασφαλή χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο/η ίδιος/α στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος και τον προσαρμογέα ρεύματος USB σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αλλά το μέρος με τρεχούμενο νερό.
- Εάν η βάση φόρτισης ή ο προσαρμογέας ρεύματος USB πέσει σε νερό, σε καμία περίπτωση μην τα χρησιμοποιήσετε. Παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η οδοντόβουρτσα καθαρίζει τα δόντια και τα ούλα και προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην εκθέτετε την οδοντόβουρτσα στα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φλόγα, θερμαντικά στοιχεία και άλλο εξοπλισμό ή συσκευές που θα μπορούσαν να είναι πιθανές πηγές θερμότητας.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για λόγους υγιεινής, η κάθε κεφαλή της οδοντόβουρτσας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν χρήστη. Αντικαθιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρετε σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας.
- Μην εισαγάγετε την οδοντόβουρτσα ή τα αξεσουάρ της σε οποιαδήποτε κοιλότητα του στόματος, εκτός της στοματικής κοιλότητας.
- Όταν η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιείται από παιδιά, επιβλέπετέ τα για όσο χρονικό διάστημα βουρτσίζουν τα δόντια τους μέχρι να κατακτήσουν τη σωστή τεχνική.
- Σε περίπτωση που έχετε υποβληθεί σε οδοντιατρικές εργασίες ή σε χειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα κατά τους τελευταίους δύο μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας σχετικά με τη χρήση οδοντόβουρτσας με τεχνολογία δόνησης.
- Σε περίπτωση που παρουσιάσετε αιμορραγία στα ούλα κατά τη χρήση της οδοντόβουρτσας και η αιμορραγία παραμένει ακόμα και μετά από μία εβδομάδα χρήσης, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
- Εάν η οδοντόκρεμά σας περιέχει υπεροξείδιο (peroxide), διττανθρακική σόδα (sodium bicarbonate) ή άλλο διττανθρακικό (χρησιμοποιείται συχνά σε οδοντόκρεμες), ξεπλένετε σχολαστικά τη βούρτσα και τη λαβή μετά από κάθε χρήση.
- Σε περίπτωση που η χρήση της οδοντόβουρτσας σας προκαλεί δυσάρεστη αίσθηση ή πόνο, σταματήστε τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- Σε περίπτωση που φέρετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος σχετικά με τη χρήση της οδοντόβουρτσας.
- Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε την οδοντόβουρτσα ή τα αξεσουάρ της σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στην οδοντόβουρτσα ή στα αξεσουάρ της. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Οδοντόβουρτσα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

- Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED θα ανάψει με μπλε χρώμα.



Σημείωση:

Κατά την πρώτη φόρτιση της οδοντόβουρτσας μετά την αγορά ή σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 3 μήνες, η οδοντόβουρτσα πρέπει να φορτιστεί για 12 ώρες.

Αν φορτίσετε την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά ή αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για πολύ καιρό, μπορεί να περάσουν έως αρκετά λεπτά για να ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED.

Η οδοντόβουρτσα ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει βλάβη.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από την πρίζα ρεύματος.
- Αν και μπορείτε να φορτίσετε την οδοντόβουρτσα μετά από την πλήρη αποφόρτίσή της, συνιστούμε, προκειμένου να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, να την φορτίζετε ανά τακτικά διαστήματα ή να την αφήσετε στη βάση φόρτισης, μόλις συνδεδεμένη στην πρίζα ρεύματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|--|
| A1 Κεφαλή οδοντόβουρτσας | A6 Βάση φόρτισης |
| A2 Άξονας σύνδεσης | A7 Καλώδιο ρεύματος με φις USB |
| A3 Ένδειξη φόρτισης
Αναμμένη = η μπαταρία φορτίζεται
Σβηστή = η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή έχει εξαντληθεί. | A8 Λειτουργία CLEAN – τυπικός καθαρισμός |
| A4 Κύριος διακόπτης/Διακόπτης επιλογής λειτουργίας καθαρισμού | A9 Λειτουργία SOFT – απαλή λειτουργία καθαρισμού για ευαίσθητα ούλα |
| A5 Ενδείξεις λειτουργίας καθαρισμού LED | A10 Λειτουργία WHITE – λεύκανση |
| | A11 Λειτουργία MASSAGE – μασάζ των ούλων |
| | A12 Λειτουργία POLISH – για γυαλιστερά δόντια |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με ζεστό, καθαρό νερό.
- Σκουπίστε το κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη βάση φόρτισης σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.



Προσοχή:

Κανένα μέρος αυτής της οδοντόβουρτσας ή η βάση φόρτισης δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων!

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία της οδοντόβουρτσας σύμφωνα με το ακόλουθο κεφάλαιο.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που επιτρέπει την ασύρματη λειτουργία της. Η παρεχόμενη βάση φόρτισης με το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση. Συνδέονται σε έναν τυπικό προσαρμογέα ρεύματος USB και ακολουθούν σε μια πρίζα ρεύματος.
- Τοποθετήστε την απενεργοποιημένη οδοντόβουρτσα στη βάση. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα και η ένδειξη φόρτισης LED στο κύριο μέρος της οδοντόβουρτσας θα ανάψει. Έπειτα, τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα σε μια κατάλληλη οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει και δεν την φτάνουν τα παιδιά.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Προκειμένου η μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος 15- 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ

- Οβηθήτε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας στον άξονα σύνδεσης του κύριου μέρους της οδοντόβουρτσας. Θα παραμείνει ένα μικρό κενό ανάμεσα στη μονάδα της οδοντόβουρτσας και τον δακτύλιο στο κάτω μέρος της κεφαλής, το οποίο όμως δεν αποτελεί ελάττωμα. Για την αφαίρεση της κεφαλής, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.
- Ξεπλύντε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με νερό και εφαρμόστε μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας.
- Τοποθετήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας στο στόμα σας μεταξύ των δοντιών και των ούλων.
- Πατήστε τον κύριο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει πέντε λειτουργίες βουρτσίσματος:
CLEAN – λειτουργία για τυπικό καθαρισμό μιας υγιούς οδοντοστοιχίας,
SOFT – απαλή λειτουργία για ευαίσθητα δόντια και ούλα, η χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας συνίσταται σε περιπτώσεις οδοντικής ευαισθησίας, έκθεσης της βάσης, περιοδοντίτιδας, εμφυτευμάτων και άλλων οδοντιατρικών υποκατάστατων,
WHITE – μια λειτουργία κατάλληλη για τη λεύκανση των δοντιών
MASSAGE – παλμική λειτουργία για απαλό μασάζ των ούλων
POLISH – για γυαλιστερά δόντια
Η ένδειξη LED της επιλεγμένης λειτουργίας θα ανάψει.
- Εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών πατώντας επανειλημμένα τον κύριο διακόπτη:

- Πατώντας μία φορά τον κύριο διακόπτη, θα ξεκινήσει η λειτουργία CLEAN.
- Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη επόμενη λειτουργία, πρέπει να πατήσετε ξανά τον κύριο διακόπτη εντός 5 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας. Η ένδειξη LED της επόμενης λειτουργίας θα ανάψει. Εάν πατήσετε τον κύριο διακόπτη μετά από περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα λειτουργίας, η λειτουργία της οδοντόβουρτσας θα διακοπεί.



Σημείωση:

Η οδοντόβουρτσα θυμάται την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται να την επιλέξετε ξανά πατώντας το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας. Εάν πατήσετε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας ενόσω καθαρίζετε τα δόντια σας, η οδοντόβουρτσα θα μεταβεί στη νέα λειτουργία και θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία. Η οδοντόβουρτσα ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει βλάβη.

ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Τοποθετήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας στα δόντια υπό γωνία 45°, παράλληλα με τα ούλα, δείτε την εικόνα E. Με μικρές και αργές κινήσεις, μετακινήστε την οδοντόβουρτσα πάνω σε όλα δόντια. Μόλις ολοκληρώσετε το βούρτσισμα της εξωτερικής πλευράς του δεξιού τμήματος του άνω οδοντικού τόξου, μετακινήστε την οδοντόβουρτσα στην εσωτερική πλευρά του οδοντικού τόξου. Και πάλι, κινηθείτε από τα πίσω προς τα μπροστινά δόντια. Προσαρμόστε τη γωνία της οδοντόβουρτσας στη θέση των δοντιών. Όταν βουρτσίζετε την εσωτερική πλευρά των μπροστινών δοντιών, κρατήστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας κάθετα, έτσι ώστε η κορυφή της κεφαλής της οδοντόβουρτσας να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Τέλος, βουρτσίζετε τις επάνω επιφάνειες των δοντιών.
- Με τον ίδιο τρόπο, βουρτσίζετε το δεξί τμήμα του κάτω οδοντικού τόξου, το αριστερό τμήμα του κάτω οδοντικού τόξου και τέλος, το αριστερό τμήμα του άνω οδοντικού τόξου. Όταν βουρτσίζετε την εσωτερική πλευρά των μπροστινών δοντιών του κάτω οδοντικού τόξου, κρατήστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας κάθετα, έτσι ώστε η κορυφή της κεφαλής της οδοντόβουρτσας να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει μια λειτουργία χρονοδιακόπτη που σταματά στιγμιαία την οδοντόβουρτσα κάθε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς, υποδεικνύοντας έτσι στον χρήστη ότι πρέπει να ξεκινήσει να βουρτσίζει την επόμενη πλευρά των δοντιών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι και οι τέσσερις πλευρές βουρτσίζονται για ίσο χρονικό διάστημα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει χρονοδιακόπτη ο οποίος διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία έπειτα από 2 λεπτά λειτουργίας. Αυτός είναι ο χρόνος βουρτσίσματος που συνιστούν οι οδοντίατροι για τις οδοντόβουρτσες με τεχνολογία δόνησης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Εάν θέλατε να διακόψετε τη λειτουργία της οδοντόβουρτσας πριν παρέλθει ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε επανειλημμένα τον κεντρικό διακόπτη έως ότου απενεργοποιηθεί η οδοντόβουρτσα.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της οδοντόβουρτσας, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προειδοποίηση:

Πριν από τον καθαρισμό, η οδοντόβουρτσα πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείται και η βάση φόρτισης πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τον καθαρισμό της οδοντόβουρτσας και των εξαρτημάτων της, μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οδοντόβουρτσας. Κανένα μέρος αυτής της οδοντόβουρτσας ή η βάση φόρτισης ή το καλώδιο ρεύματος δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων!

- Για λόγους υγιεινής, καθαρίζετε την οδοντόβουρτσα τακτικά μετά από κάθε χρήση.
- Ξεπλύνετε σχολαστικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με χλιαρό τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τυχόν οδοντόκρεμα ή άλλα υπολείμματα. Αν χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες λεύκανσης για το βούρτσισμα των δοντιών σας, συνιστάται να βάζετε μια σταγόνα σαπούνι στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας και, στη συνέχεια, να την πλένετε σχολαστικά με χλιαρό τρεχούμενο νερό. Αφαιρείτε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας από τη λαβή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και καθαρίζετε την κάτω από χλιαρό τρεχούμενο νερό, ειδικά στο σημείο που ενώνεται με τη λαβή.
- Καθαρίστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας με ένα ελαφρώς κλωπιδάκι και, στη συνέχεια, σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.
- Σε περίπτωση που η βάση φόρτισης έχει λερωθεί, σκουπίστε την με ένα καθαρό, κλωπιδάκι και έπειτα στεγνώστε. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Ποτέ μην στεγνώνετε εξαρτήματα της οδοντόβουρτσας πάνω από πηγές θερμότητας όπως ζυλόσομπες, ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου, κ.λπ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Αντικαθιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρετε σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας. Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικές κεφαλές από τον πωλητή σας, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε την καθαρή οδοντόβουρτσα και την κεφαλή της σε στεγνό, καθαρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα και τα εξαρτήματά της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην τα αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκοτεινά περιβάλλοντα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οδοντόβουρτσα

Μπαταρία.....Li-ion / 3,7 V / 800 mAh
Χρόνος λειτουργίας με πλήρη φόρτιση.....έως 180 λεπτά
Επίπεδο θορύβου.....<65 dB(A)
Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζήμια από είσοδο νερού.....IPX7
Ταχύτητα δόνησης.....40.000 δονήσεις/λεπτό

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι το μικρότερο από 65 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 μW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού:
IPX7 – Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο του νερού όταν βυθίζεται σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε τη συσκευή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή της. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για σωστή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να

επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

