

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą vartotojo vadovą ir įsisąmoninkite saugos priemones bei išsamius nurodymus, kaip naudoti šį prietaisą. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

Jeigu šį prietaisą parduosite, nepamirškite naujam savininkui kartu su šiuo prietaisu bei jo priedais atiduoti ir šio vartotojo vadovo.

## Svarbios saugos priemonės

### SVARBU!!!

**Naudojant alkoholio matuoklį nepraėjus 15 minučių nuo alkoholio vartojimo, gali būti sugadintas aptikimo jutiklis, todėl paskesni matavimai gali būtų netikslūs. Naudojant šį prietaisą neprofesionaliai, garantija nebegalios.**

- Neatlikite testų pučiant stipriam vėjui arba uždaroje, prirūkytose, alkoholio garų pilnose patalpose.
- Jeigu ekrane rodomas išeikvoto maitinimo elemento ženklas, pakeiskite maitinimo elementus naujais.
- Nepūskite į pūstuką dūmų, maisto arba skysčių.
- Naudokite šį prietaisą tik ten, kur yra +10–+40 °C temperatūra. Jeigu naudosite šį prietaisą esant kitai temperatūrai, jis gali būti sugadintas ir tikrinimo rezultatai gali būti netikslūs.
- Alkoholio lygis iškveptame ore priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie laikui bėgant kinta. Šis lygis gali pakisti per kelias minutes nuo pradinio testo.
- Šio prietaiso matavimų rezultatų negalima naudoti teismuose kaip įrodymų.
- Šiuo prietaisu gauta informacija tėra informatyvaus pobūdžio. Rekomenduojame nenaudoti jo, norint priimti sprendimus dėl galimybių imtis bet kokios veiklos, kuri reikalauja atsakomybės. Keli veiksniai (t. y. gamtinių dujų likučiai, dūmai ir nepageidaujamas kvapas) gali turėti įtakos išmatuotų dydžių lygiui.
- Nevažiuokite transporto priemone patys ir neleiskite to daryti kitiems, jeigu vartojote alkoholį. Jeigu vartojate alkoholį, visada susitarkite, kad jus parveš namo, arba naudokitės alternatyviomis transporto priemonėmis.
- Nei pardavėjas, nei gamintojas nėra atsakingi už žalą, kilusią dėl šio prietaiso naudojimo.

**NEKADA NEVARTOKITE ALKOHOLIO, JEIGU PLANUOJATE VAIRUOTI MOTORINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ!!!**

**Dėmesio:** Po vienerių naudojimo metų, rekomenduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Prietaisą naudojant dažniau, jo naudojimo laikas gali sutrumpėti ir matavimo rezultatai gali būti netikslūs.

## Įrenginio aprašymas



## Maitinimo elementų įdėjimas

1. Atidenkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį.
2. Įdėkite du AAA šarminius maitinimo elementus pagal poliškumą, nurodytą maitinimo elementų skyriuje.
3. Vėl uždarykite dangtelį.
4. Įdėjus maitinimo elementus, bus automatiškai paleistas automatinio valymo procesas. Pradės žybcioti automatinio valymo indikatorius; ekrane bus rodomas atgalinis laiko skaičiavimas.
5. Automatinio valymo funkcijai pasibaigus, galėsite vėl naudoti prietaisą.

## Pastaba:


Išimkite maitinimo elementus, jeigu prietaisą sandėliuosite arba ilgai jo nenaudosite.

Saugokite maitinimo elementus nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. Netinkamai naudojant maitinimo elementus, juose esantis elektrolitas gali ištekti ir sukelti koroziją. Norėdami užtikrinti, kad prietaisas tinkamai veiktų, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Dėkite maitinimo elementus tinkama kryptimi.
- Nekraukite, nešildykite, neardykite maitinimo elementų ir nesujunkite jų trumpuoju jungimu.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį.
- Nepalikite išsikvotų maitinimo elementų prietaise.
- Nenaudokite vienu metu įvairių tipų maitinimo elementų; nedėkite kartu naujų ir senų maitinimo elementų.
- Jeigu prietaiso ilgai nenaudojate, išimkite maitinimo elementus, kad išvengtumėte galimos žalos dėl maitinimo elementų ištekėjimo.
- Jeigu prietaisas veikia netinkamai arba sumažėja jo efektyvumas, pakeiskite visus maitinimo elementus naujais.
- Jeigu elektrolitas ištektų iš maitinimo elementų, atiduokite prietaisą į įgaliojantį techninio aptarnavimo centrą, kad jį išvalytų.

## Naudojimas

1. Prieš naudojant prietaisą, būtina išskalauti burną švariu vandeniu. Nerūkykite ir nevartokite alkoholinių gėrimų bent 5 minutes prieš naudojimą.
2. Įkiškite šiaudelį arba pūtimo vamzdelį į įleidimo angą, esančią virš LCD ekrano.
3. Įjunkite prietaisą, spustelėdami mygtuką START (pradėti). Maždaug 18-kai sekundžių įjungiamas pašildymo jutiklis. Ekrane vieną kartą sužybcios „PH“, paskui ekrane pasirodys „Wait“ (palaukite) ir bus pradėtas atgalinis laiko skaičiavimas.

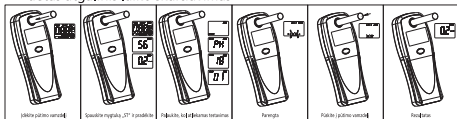

## Svarbu

Palaukite, kol bus baigtas pašildymo procesas, nes jutiklis turi įšilti.

Kai tik atgalinis laiko skaičiavimas bus baigtas, ekrane pasirodys „READY“ (parengtas) ir pasigirs garso signalas, pranešantis, kad prietaisas yra parengtas naudojimui. Tuo pat metu ekrane pradės žybcioti indikatorius „BLOW“ (pūsti), pranešantis, kad vartotojas turi pūsti į vamzdelį.

4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką START (pradėti): užsidegs „BLOW“ (pūsti) ir pasigirs ilgas garso signalas. Tuo pat metu reikia pūsti į vamzdelį. Į vamzdelį reikia pūsti vienodu stiprumu maždaug 6 sekundes.
  - Kai tik išgirsite trumpą garso signalą, liaukitės pūte. Ekrane bus rodoma atitinkama informacija.
  - i. Jeigu išmatuotas dydis nesieks 0,1 ‰ BAC (alkoholio koncentracijos ‰ kraujyje), ekrane bus rodoma „0,0“ (mažas kiekis).
  - ii. Jeigu išmatuotas dydis sieks 0,1 ‰ – 4 ‰ BAC, jis bus rodomas ekrane.
  - iii. Jeigu išmatuotas dydis viršys 4 ‰ BAC, ekrane bus rodoma „HI“ (didelis kiekis) ir „NO DRIVING“ (vairuoti draudžiama).
5. Norėdami atlikti kitą testą, spustelėkite mygtuką „START“ (pradėti). Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui ir ekrane pasirodžius indikatoriumi „READY“ (parengtas) bei pasigirdus garso signalui, galite vėl naudoti prietaisą.
6. Norėdami prietaisą išjungti, paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „START“ (pradėti). Prietaisas išsijungs automatiškai, jeigu per 2 minutes nepaspausite jokio mygtuko.

## Įspėjimo signalai

Mažas kiekis	Jeigu išmatuotas dydis nesiekia 0,1 ‰ BAC (alkoholio koncentracijos ‰ kraujyje), ekrane rodoma „0,0“ (mažas kiekis) ir ekranas būna apšviestas ŽALIA spalva.
Įspėjimo lygis	<p>Išmatuotas dydis prilygsta arba viršija įspėjimo, esant didelei alkoholio koncentracijai kraujyje, lygį. Pasigirs garso signalas ir ekrane maždaug 15 sekundžių žybsios „NO DRIVING“ (vairuoti draudžiama). Ekranas pakaitomis bus apšviečiamas skirtingomis spalvomis – tai ŽALIAI, tai RAUDANAI.</p> <p>Jeigu išmatuotasis dydis viršija 4 ‰, ekrane rodoma „NO DRIVING“ (vairuoti draudžiama) ir „HI“ (didelis kiekis). Norėdami išjungti garso signalą, spauskite mygtuką MODE (režimas).</p> <p><b>VAIRUOTI DRAUDŽIAMA, net jeigu tėra viršytas žemas įspėjimo lygis.</b></p>

## Svarbios pastabos

- Jeigu prietaiso nenaudojate ilgiau nei 2 savaites (ypač, jeigu jį naudojate pirmą kartą), norint užtikrinti tikslius matavimų rezultatus, būtina atlikti taip vadinamą automatinį valymą. Paleiskite automatinio valymo procesą; tam išimkite maitinimo elementus, vėl juos įdėkite ir įjunkite prietaisą. Pradės žybcioti indikatorius „INICIJUOTI“ (automatinis valymas). Automatinio valymo procesas trunka maždaug 5 minutes; tuo metu ekrane rodomas atgalinis laiko skaičiavimas. Skaičiuojant paskutinę minutę, pasigirs garso signalas. Po 1 minutės prietaisas automatiškai išsijungs ir automatinio valymo procesas bus baigtas. Prieš atlikdami testą patikrinkite, ar pūtimo vamzdelio ertmėje nėra alkoholio likučių.
- Jeigu paspausite ir maždaug 2 sekundes palaikysite nuspaudę mygtuką „START“ (pradėti), automatinio valymo procesas bus baigtas, o prietaisas išjungtas. Jeigu norite, kad automatinio valymo procesas būtų praleistas ir pradėtas matavimas, spustelėkite mygtuką „START“ (pradėti).
- Norėdami, kad matavimai būtų tikslūs, prieš pradėdami naudoti prietaisą, privalote patikrinti, ar prietaise neliko alkoholio likučių. Privalote tikrinti prietaisą, kol ekrane bus rodoma „LO“ (mažas kiekis). Tai padarysite vieną kartą paspaudę mygtuką „START“ (pradėti). **Paspauskite ir palaikykite** kelias sekundes nuspaudę mygtuką „START“ (pradėti) bei pūskite į pūtimo vamzdelį. Jeigu reikia, galite kelis kartus pakratyti prietaisą, tuomet likęs alkoholis pasišalins iš prietaiso.
- Atlikę 4 testus iš eilės, leiskite prietaisui pailsėti 2 minutes.
- Jeigu ekrane ilgiau nei 5 sekundes žybcioja „Er“ (klaida), tai gali reikšti netinkamą prietaiso naudojimą:
  - Testo metu nelaikėte nuspaudę mygtuko „START“ (pradėti).
  - Norėdami išjungti klaidos garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Jeigu prietaiso nenaudosite, laikykite jį sausoje vietoje.
- Jeigu pradeda žybcioti išeikvotų maitinimo elementų indikatorius kontrolinė lemputė, matavimas nėra tikslus; būtina nedelsiant pakeisti maitinimo elementus.
- Jeigu dviejų iš eilės atliktų matavimų skirtumas viršija 0,1 %, matavimą privaloma pakartoti.

# Techniniai duomenys

Matavimo ribos	0,1–4 ‰
Maitinimo elementai	2 x 1,5 V AAA šarminiai maitinimo elementai
Ekranas	Skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas su dvispalviu foniniu apšvietimu
Matavimo vienetai	‰ (arba % BAC, arba mg/l; pasirinktinai)
Automatinis išjungimas	po 2 minučių
Testo trukmė	≥ 6 sekundės
Pasiruošimo testui laikas	25 sekundės
Matmenys (a x p x g) cm	98 x 36 x 16 mm
Svoris	Maždaug 27 g (be maitinimo elementų)
Išpėjimų gradavimo padalos	0,2 ‰
Priedai	3 pūtimo vamzdeliai

Pirmiau pateikti duomenys gali būti keičiami be išpėjimo.

**Nepamirškite**, kad išmatuotas dydis gali priklausyti nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, oro užterštumo, dūmų ir įvairaus burnos kvapo. Todėl prisiminkite, kad išmatuotas dydis tėra informatyvaus pobūdžio. Nei gamintojas, nei pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio prietaiso naudojimo.

**Perspėjimas!** Naudojant alkoholio matuoklį nepraėjus 15 minučių nuo alkoholinių gėrimų vartojimo, gali būti sugadintas aptikimo jutiklis, todėl paskesni matavimai gali būtų netikslūs. Naudojant šį prietaisą neprofesionaliai, garantija nebegalios.



## Naudotų maitinimo elementų išmetimas

Nuneškite naudotus maitinimo elementus į tam skirtus surinkimo punktus. Vadovaukitės jūsų šalyje galiojančiais teisės aktais.

## **NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMĄ**

Pristatykite pakavimo medžiagas į tam skirtą buitinių atliekų surinkimo punktą.

### **SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS**



Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Arba alternatyviai kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse, įsigyjant tokį patį naują gaminį, senąjį galima sugrąžinti vietos pardavėjui. Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje. Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

#### **Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms**

Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

#### **Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.



Šis gaminytis atitinka visus pagrindinius atitinkamų ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, konstrukcija ir techninės specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.