

**EN ■ User Manual****BREATHALYSER****CZ ■ Uživatelská příručka****ALKOHOL TESTER****SK ■ Používateľská príručka****TESTER ALKOHOLU****HU ■ Felhasználói kézikönyv****ALKOHOLSZONDA****PL ■ Podręcznik użytkownika****ALKOMAT**

# TARTALOM

1. Fontos biztonsági utasítások .....	2
2. Mérés.....	2
3. Az elem behelyezése .....	3
Javaslat: .....	3
4. A készülék leírása.....	4
5. Vezérlés .....	5
Az eszköz bekapcsolása és kikapcsolása .....	5
Az alkoholvizsgálat elindítása .....	5
Memória funkció.....	6
Az alkohol mérétegység és a figyelmeztetési szintek beállítása .....	6
Fontos megjegyzések .....	7
6. Műszaki adatok.....	8

# 1. Fontos biztonsági utasítások

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, ismerje meg a fontos biztonsági figyelmeztetéseket és a használatra vonatkozó részletes utasításokat. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi használatra. A készülék eladása esetén ne felejtse el az útmutatót átadni az új tulajdonosnak a készülékkel és a tartozékokkal együtt.

## FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!!!

**Ha az alkoholszondát szeszes ital fogyasztása után közvetlenül vagy 15 percen belül használja, a szonda meghibásodhat és a további mérések pontatlannak lehetnek. Ezzel elveszíti a készülékre vonatkozó jótállást szakszerűtlen kezelés miatt.**

**A készüléket javasoljuk szabahőmérsékleten tárolni. Ha ettől eltérő hőmérsékleten használja és tárolja, az befolyásolhatja a mérés pontosságát.**

A vizsgálatot ne végezze erős szélben, vagy telefüstölt, alkoholgőzös zárt helyiségen.

- Ha a kijelzőn megjelenik a lemerült akkumulátor ikonja, töltse fel a készüléket.
- A fűvökába ne fújjon füstöt, ételt vagy folyadékot.
- A meghatározott környezeten kívüli használat a készülék meghibásodásához és pontatlannak vizsgálati eredményekhez vezethet.
- Az alkoholszint a lélegzetben sok tényezőtől függ, és az idő múlásával változik. A szint már néhány perccel az eredeti mérés után más lehet.
- A készülék mérési eredményei nem használhatók fel bizonyítékként bíróság eljárásban.
- A készülék adatai csupán tájékoztató jellegűek. Nem javasoljuk annak eldöntésére használni, hogy valaki képes-e felelős tevékenység végzésére. Néhány tényező (pl. füldgázmaradékok, füst vagy kellemetlen lehelet) befolyásolhatja a mért értékeket.
- Ne engedje meg se magának, se másnak, hogy alkohol fogyasztása után járművet vezessen. Ne szállítsa alkoholos befolyásoltság alatt álló személyt, aki aktívan részt vehet a jármű vezetésében (különösen pedálnyomással, fékezással, a jármű egyensúlyának kedvezőtlen befolyásolásával vagy hasonló módon).
- Sem az eladó, sem a gyártó nem felelős a készülék használatából adódó károkért.

**SOHA NE IGYON ALKOHOLT, HA GÉPJÁRMŰVET KÉSZÜL VEZETNI!!!**

## 2. Mérés

- Az SCA BA10 személyi alkoholszonda kézi, tanúsítvánnyal nem rendelkező mérőeszköz, a mért érték eltérhet egy tanúsítvánnyal rendelkező készülék által mért értéktől.
- A mérés előtt legalább 15 percig tartózkodjon az alkoholfogyasztástól és a dohányzástól.
- Használat előtt mossa meg vízzel a száját.

## **Javaslat:**


A lehető legpontosabb mérés érdekében javasoljuk, hogy a műszer hosszabb ideig tartó használata után a belső mérőmodult cserélje ki egy új, előrekalibrált modulra. Ez az időtartam nem pontos, javasoljuk pl. 1-2 év használat után vagy 1-2 ezer mérés után.

Vegye fel a kapcsolatot az eladóval, vagy közvetlenül a FAST, ČR, a.s. szakszerviz részlegével. Technicka 1701, Říčany u Prahy, telefonos kapcsolat: +420 323 204 120, e-mail: servis@fastcr.cz. Az új modulhoz az aktuális ár kifizetése ellenében juthat hozzá.

## **3. Az elem behelyezése**

- Kérjük, helyezzen be három AAA (LR03) 1,5 V-os alkáli elemet az új készülékbe. Az elemeket az ábra szerint helyezze be a fedél alatti elemtártóba.
- Ha nincs az elemekben elég energia az alkoholvizsgálat elvégzéséhez, az elemek jelzőfénye villogni kezd. Haladéktalanul cserélje ki az elemeket újra.

## 4. A készülék leírása

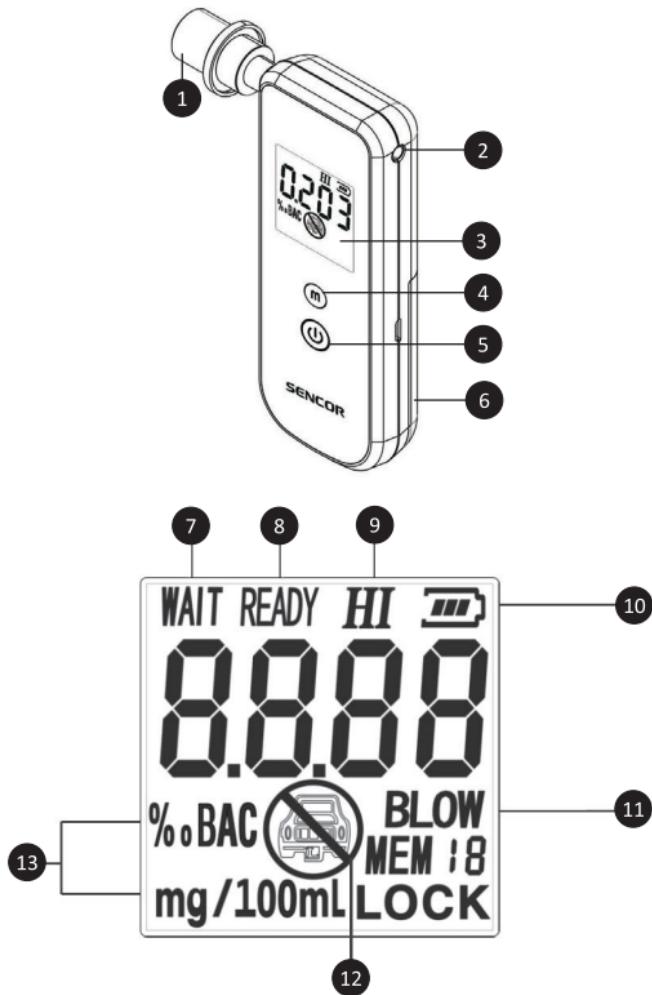

1. Fúvóka
2. Kimenet
3. Kijelző
4. „m” gomb
5. ON/OFF gomb
6. Az elemtártó rekesz fedele
7. Várjon
8. Kész
9. A véralkoholszint a figyelmeztetési szint felett
10. Akkumulátorjelző ikon
11. Fújjon
12. Ne vezessen
13. Mértékegységek

## 5. Vezérlés


### Az eszköz bekapcsolása és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer az **ON/OFF** gombot.
- Ha az LCD-kijelzőn megjelenik az „ALCO” felirat, nyomja meg az **ON/OFF** gombot, és kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a készülék kikapcsolásához.

### Az alkoholvizsgálat elindítása

- Helyezze be a fúvókát
- Kapcsola be a készüléket a **BE/KI** gombbal, és várjon 40 másodpercet, amíg megtörténik a kalibráció. A kijelzőn villogni fog a „WAIT” (VÁRJON) felirat, és elindul egy 40 másodperces visszaszámlálás. A kalibráció befejezése után a „BLOW” (FÜJJÖN) felirat villogva jelenik meg, és a készülék hangjelzést ad ki.
- Ha felkészült a fújásra, fújon folyamatosan 5–7 másodpercig a fúvókába. Az érzékelő érzékel a légzési mintát; hagyja abba a fújást, amint két rövid sípolást hall. Ha a légzési mintavétel sikeres volt, megtörténik az elemzése, hallani fog egy hangjelzést, majd megjelenik a mért érték. Ha a fújás időtartama túl rövid, vagy a fújás áramlása túl gyenge vagy megszakadt, az LCD-kijelzőn a „FLO” felirat jelenik meg.
- Az új vizsgálathoz nyomja meg egyszer az **ON/OFF** gombot.
- A vizsgálat eredménye kb. 60 másodpercig látható az LCD-kijelzőn.



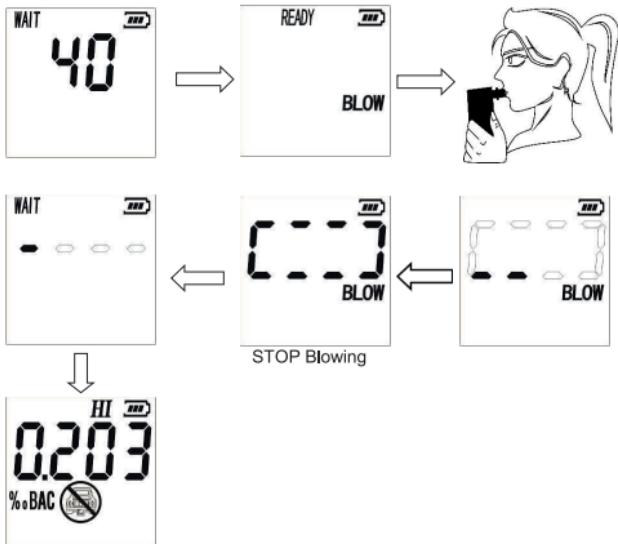

## Memória funkció


- A készülék memóriájába akár 20 eredményt lehet elmenteni.



- Beolvásás a memóriából: nyomja meg az „m” – beolvásás a memóriából – gombot a memória üzemmód aktiválásához, majd nyomja meg újra az „m” gombot az utolsó 20 eredmény lekérdezéséhez és megjelenítéséhez.
- A memória megjelenítése üzemmódban az „m” gomb és az ON/OFF gomb 2 másodperces nyomva tartásával törölheti a memóriát. A memória törlését követően a kijelzőn „- - - -” jelenik meg.

## Az alkohol mértékegység és a figyelmeztetési szintek beállítása

- Távolítsa el a hátsó fedelel és vegye ki az egyik elemet. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „m” gombot.  
A gomb lenyomása közben helyezze be az elemet, és tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzőn az értékek váltakozása meg nem szűnik.

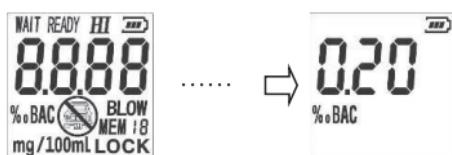

2. Az **ON/OFF** gomb megnyomásával válthat a mértékegységek között: % BAC, %BAC, mg/L.



3. Az „m” gomb megnyomásával módosíthatja a figyelmeztetési szintet, pl. 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,80, 1,00% BAC.



4. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az **ON/OFF** gombot a beállítások mentéséhez (**SAVE**). A készülék visszatér teszt üzemmódba, és 40-ig számol a teszthez.



### Fontos megjegyzések

- 5 egymás utáni vizsgálat után hagyja a készüléket 5 percig pihenni.
- A terméket száraz környezetben, szobahőmérsékleten tárolja.
- Kerülje el a szélőséges meleget, és ne tegye ki hosszabb ideig napfénynek.
- Amikor az akkumulátor jelzőfénnye villog, cserélje ki az elemet.
- Ne használjon tölthető elemeket.
- Ha két egymás utáni mérési eredmény között a különbség  $> 0,1\%$  ( $0,01\%$ ), a felhasználónak **érdekes** új vizsgálatot elvégezni.
- A mintavétel alatt **NE TÖMÍTSE EL** a kimenetet.
- Ha a kijelzőn villog a „FLO” felirat, ennek oka a túl gyenge légáramlat vagy a fújás megszakítása. Az új vizsgálathoz nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

## **6. Műszaki adatok**

### **SCA BA10**

Alkoholszintmérő félvezető érzékelővel

A feladata a vér alkoholtartalmának megjelenítése

Cserélhető előkalibrált érzékelő a készülékben

Automatikus öntisztítás

Digitális LCD kijelző háromszínű háttérvilágítással

Akusztikus és optikai jelzés

#### **Mérés:**

Méréstartomány: 0,000 - 3,000 ‰ BAC (véralkoholszint)

Mértékegységek: ‰ BAC vagy mg/L

Felbontás: 0,001‰ BAC

Riasztás  $\geq 0,2\%$  BAC alkoholtartalom esetén (módosítható - lásd az útmutató)

Pontosság: jobb, mint  $\pm 0,1\%$  BAC 0,2‰ BAC értéknél

#### **Egyéb:**

Mérésszámláló

Memória: akár 20 mérés

A mérés időtartama: 5 - 7 mp

Önműködő kikapcsolás tétlenség esetén

Tápellátás: 3 db 1,5 V AAA elem (nem a csomag része) vagy USB-kábel

A készülék méretei (ma x szé x mé): 115 x 47 x 20 mm

A készülék tömege: 62 g

Tartozékok: 2 fúvóka, USB kábel, használati útmutató

#### **A csomag tartalma:**

Alkoholszonda

2 x fúvóka

Használati útmutató

# A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMSÍTÉSE

 Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

### Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

 Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkötetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01



## Jótállási jegy

1. A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Ríčany, Cseh Köztársaság)
2. A **FAST Hungary Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kátor út 10.) mint a termék *magyarországi importőre* a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállás biztosít a **fogyasztók számára** az alábbi feltételek szerint:
3. A **FAST Hungary Kft.** a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzeme helyezéstől terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végezi, az üzeme helyezéstől számított **24 hónapig, míg 250.001,- Ft eladási ártól 36 hónapig** tartó időtartamra **vállal** jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék **alkotórészeire és tartozékaire** (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási idő **12 hónap, azzal, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki**. minden olyan termékünk (illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (*Rendelet*) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó **10.000,- Ft-ot eléri**, tartós fogyasztási ciknek minősül, és mint ilyen, **kötelező jótállás** hatályá alá **is** tartozik (a termék áratól függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve 250.001,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000,- Ft vételárral alatti vagy a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben szereplő 10.000,- Ft vételárat elérő és 100.000,- Ft vételárat meg nem haladó termékek esetén a 13-24 hónap közti időtartamra önként vállalt jótállás. Önként vállalt jótállás továbbá a termékek alkotórészeire és tartozékaire vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészének vagy tartozékának vételára a bruttó 10.000,- Ft-os vételárat nem éri el, továbbá ha a termék maga a Rendeletben nem szerepel.
4. A jótállási igény (alábbi 6.(i) és 6.(ii) pontok) a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzeme helyezéstől) számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket **értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény esetén** annak **székhelyén, vagy bármely telephelyén, fiótelepen**, illetve **kijavítási és csere igény esetén a jótállási jegyben feltüntetett hivatalos szerviznél közelben** van. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz **100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termékekre** a kötelező jótállási időn belül további egy éves önkéntes jótállási idő esetén **jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárálag csere és javítás** érvényesithető, amely igényekkel Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez **is** fordulhat.
5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékeit megfizetését hitel érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tiszta Vásárolóinkat, hogy örizzen meg a fizetési bizonylatot is.
6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - **választása szerint** - (i) a hibás termék díjmentes **kijavítását vagy kicsérélését** követelheti, kiveve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnak másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatót hogyan bírálhatan képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő **árleszállítási igényelhet, vagy elállhat** a szerződéstől ha: a kötelezettség a kijavítást vagy a kicsérélést **nem vállalata**, vagy a termék szerződésszerűté tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással **megtagadta**, vagy a körműlényekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségek megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kimélé vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelmet nélküli nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezettség megszűrelte a termék szerződésszerűté tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicséréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokoltá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a 6.(ii) alpon szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezettség a kijavítást vagy a csereként, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicsérélést áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettséget, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzeme helyezett áru esetén a kötelezettség a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzeme helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzeme helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesítette. **Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.** A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás

köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhét át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettségének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezettség adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

**7.** A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani minden díjat, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

**8.** Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árakat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árat, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árat vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

**9.** Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladt dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.

**10.** Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicsérélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

**11.** Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok szerint nem igényli a vételár arányos leszállítását, a termék 8 napon belül kicsérélésre kerül. Ha a termék kicsérélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

**12.** Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közháról számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltek követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltek követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

**13.** A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelmből eredő kárt a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárolag a jótállási határidőben (tehát a termék áratól függően 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) érvényesíthető! Mindazonáltal a kötelező jótállási határidő meghosszabbodói a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezettség jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüztőt megfelelő határidő elteltektől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelte. Ez határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

**14.** A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felmerülő költségek a jótállás kötelezettségét terhelik. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

**15.** A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezettség nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikkkel kicsérálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

**16.** Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árat a kijavítás vagy kicsérélés érdekében a kötelezettség rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a jogosult által elvárhotható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekelte kímélve kell elvégezni. A kötelező jótállás keretében kijavítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicsérélés (a fenti 10., 11., 12. pontokban foglaltak sérelmes nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekdedési

eszközön kezí csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás , vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

**17.** Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a **hiba oka** a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatait képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemserű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezettség tekintetben tájékoztatási kötelezettségének elégít tett. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekszavatosságá (Ptk. 6:159. § - 6:167. §) illetve termékszavatossági jogait (Ptk. 6:168. § - 6:170. §), és ezek jogszabályban előírtak szerinti téritésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

**18.** Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésre érdekelben Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békélítető testület eljárását is kezdeményezheti (a békélítető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek>, és <https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto testuletek>).

#### Akereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár: .....

Típus:..... Gyártási szám: .....

Vásárlást igazoló bonyolat száma:.....

Szerződéskötés időpontja: .....

Az átadás időpontja: 20..... hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... hó.....nap

Kereskedő bélyegzöje: Kereskedő aláírása: .....

Kereskedő címe:.....

#### Javítás esetén alkalmazandó

#### Akereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

##### 1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

**2. kijavítási igény**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecséte:

Kereskedő pecséte:

**3. kijavítási igény**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecséte:

Kereskedő pecséte:

**Kicsérélés esetén alkalmazandó**

A jótállási igény kicséréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

**Kicsérélés esetén alkalmazandó**

A jótállási igény kicséréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tiszttel Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST Hungary Kft.** H-2310 Szigetszentmiklós, Kátor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: [szerviz@fasthungary.hu](mailto:szerviz@fasthungary.hu)

**FAST ČR, a.s.**, U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01